

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27 VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	 Sistemas de Información S.A.
---	---	---	---

Manual de Usuario

MODULO

NUTRICIÓN

INTRODUCCIÓN

El módulo de Nutrición está diseñado permitir la creación de los diferentes tipos de dietas, de acuerdo a las necesidades de la institución

Para apoyar la gestión de Nutrición PANACEA ® cuenta con las opciones: Crear Nutrientes, Crear Menú Plato, Realizar programación de dietas, Consultar órdenes de dieta, Generar orden de producción para nutrición parental.

OBJETIVO

La finalidad del presente manual es describir las características y detalles funcionales del módulo, para facilitar el correcto uso a todos los usuarios que interactúan con cada una de las opciones de Nutrición del sistema PANACEA®.

DIRIGIDO A

Este documento está orientado a técnicos y administradores del sistema, los cuales son responsables de la parametrización y registro de movimientos del módulo de Nutrición.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Para la interfaz de usuario se requiere tener instalado:

- Sistema Operativo Windows 2000, XP o superior
- 128 megabytes de memoria RAM o superior
- Procesador Pentium II
- Espacio mínimo en disco duro de 50MB
- Internet Explorer Versión 8 o superior.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

TABLA DE CONTENIDO / ÍNDICE

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
REQUISITOS DEL SISTEMA	1
1.1 Alcance del módulo nutrición	3
1.2 Generalidades Panacea.....	4
2. PRERREQUISITOS.....	19
2.1 Inicio De Sesión.....	19
2.2 Tablas del Sistema.....	19
2.3 Tablas Básicas	19
2.4 Crear Nutrientes	19
2.5 Crear Menú/Plato.....	19
2.6 Crear Diagnósticos.....	20
2.7 Crear Artículos Administrativos.....	21
2.8 Crear Artículos Asistenciales.....	21
3. USO DEL APLICATIVO MODULO NUTRICIÓN.....	21
3.1 Crear Nutrientes.....	22
3.2 Crear Menú Plato.....	289
3.3 Programación de dietas.....	37
3.4 Consultar ordenes de dieta	48
3.5 Ordenes de producción para nutrición parenteral.....	53
ERRORES FRECUENTES	56
PREGUNTAS FRECUENTES	57
GLOSARIO	58
NOTAS DE CAMBIOS	59

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

1. GENERALIDADES

1.1 Alcance del módulo nutrición

El módulo de nutrición se compone de las siguientes funcionalidades:

- **CREAR Nutrientes** Para la creación de nutrientes como azúcares, proteínas, grasas, etc, cada componente tiene relacionado un grupo al que pertenece para luego saber ejemplo total de grasas.
- **CREAR MENÚ PLATO:** Panacea permite la creación de menús o platos, para luego con esto poder crear las minutas o programaciones para proporcionar alimentos a los pacientes que estén hospitalizados en la institución, cada menú se creara relacionado a un tipo de dieta, a un subtipo de dieta y a un tiempo de comida, para luego poder identificar que platos sugerir en cada tiempo de comida, a cada paciente de acuerdo con lo ordenado por el profesional de la salud.
- **REALIZAR PROGRAMACIÓN DE DIETAS:** La programación se hace para un rango de fechas y de acuerdo de los diferentes tipos de nutrientes que se quiera incluir. Se puede hacer de forma general o por paciente.

Los programas tienen asociados unos menús y son creados a manera de ayuda para personas con objetivos nutricionales similares, en PANACEA los programas nutricionales se manejaran como un tipo y subtipo de dieta.

PANACEA permite la programación de dietas, para los pacientes que se encuentran hospitalizados, es decir los diferentes menús o Alimentos para cada tiempo de comida

- **CONSULTAR ÓRDENES DE DIETA** PANACEA permite al personal de nutrición hacer la consulta de las órdenes de tipo dieta que han sido generadas de tipo interna es decir a los pacientes que actualmente tienen una admisión porque se encuentran hospitalizados.

El presente caso de uso describe la consulta de dichas órdenes agrupadas por tipo de estancia donde se encuentre el paciente.

- **GENERAR ORDEN DE PRODUCCIÓN PARA NUTRICIÓN PARENTAL:** PANACEA permite la generación de la orden de producción para la central de mezclas de nutrición parenteral, tomando como base las ordenes de medicamentos con marca de mezcla.


PANACEA no hará el cálculo de las cantidades requeridas por el paciente, por cada medicamento, sino que permitirá registrar el dato ya calculado.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)


	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

1.2 Generalidades Panacea

- Campo Obligatorio * : Dentro de los formularios del sistema de información PANACEA®, los campos obligatorios se encuentran identificados con un asterisco de color naranja *, estos deben ser diligenciados en su totalidad para poder guardar la información registrada en dicho formulario.
- Validación de obligatoriedad y formato: Cuando dentro de un formulario del aplicativo PANACEA® se omita el registro de un dato definido como obligatorio, o se registre información inconsistente con el tipo de dato, Ej, la contraseña al crear un usuario debe contener una mayúscula y no se registra, el sistema marca el campo con un signo de admiración naranja dentro de un círculo gris, al acercar el Mouse al símbolo, el sistema indica el detalle de la validación en un la label aclaratorio.

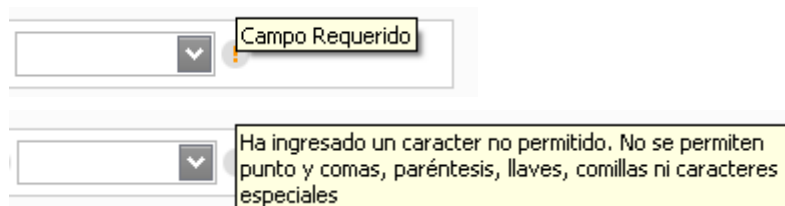

- Confirmación de operaciones: El sistema emite mensajes para ratificar la realización de las operaciones, para los casos en que ser requiera, por ejemplo cuando no se puede eliminar por integridad referencial, la ventana muestra la opción ver detalle, como complemento informativo del motivo fallido de la operación:

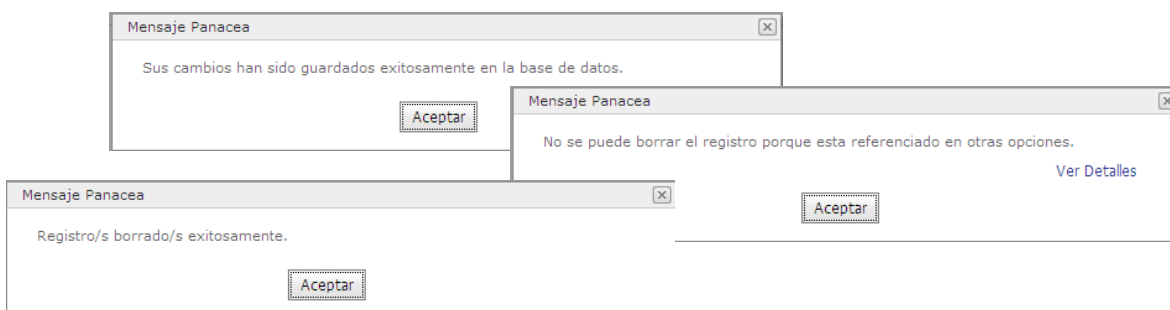

Al pulsar aceptar se cierre la venta de confirmación de la operación.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

- **Tablas Básicas:** Son utilizadas por otras opciones de Parametrización. En su mayoría se componen de una descripción y un estado Activo/ Inactivo, y aunque su frecuencia de consulta por otras opciones del sistema es alta, su frecuencia de actualización o inserción de información es baja. Son creadas/alimentadas por el usuario parametrizador / administrador del sistema.
- **Tablas Del Sistema:** Son tablas la cuales ya contienen datos creados previamente por el sistemas de informacion de PANACEA®.
- **Búsquedas:** Las opciones donde se permite hacer búsquedas se encuentran identificadas dentro del sistema PANACEA®. Con un ícono así:



Manejando dos tipos de búsquedas:

- **Simple:** Para lo cual se registra dentro del campo mínimo 3 caracteres de la búsqueda a realizar y se pulsa la lupa sencilla, el criterio de búsqueda simple está definido para cada opción en general se usa el nombres.
- **Avanzada:** Permite hacer búsquedas combinando varias características; al pulsar sobre la lupa que contiene el +, se inicia al búsqueda avanzada, para cada opción están definidos los diferentes datos de búsqueda, por cada dato se puede definir el criterios a usar, el detalle de la búsqueda y la opción de conectores y / o para poder asociar varios filtros. En la ventana ejemplo se tiene como dato Clase de tercero, criterio igual, detalle de la búsqueda Otra IPS y como conector Y.




ELABORÓ:		
Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011	(Diciembre de 2009)

Cuando se tiene creado el filtro se puede guardar, al pulsar esta opción el sistema solicita un nombre y con este se podrá volver a hacer búsquedas, seleccionando el nombre del filtro guardado en búsquedas anteriores.

Al pulsar buscar el sistema carga el resultado de la búsqueda y al seleccionar el o los datos y pulsar aceptar se cargan en el formulario desde donde se hizo el llamado de la búsqueda.

- **Cancelar:** Cuando se pulsa el botón Cancelar , el sistema anula cualquier acción que se haya realizado y regresa al formulario original sin guardar cambio alguno.
- **Justificación:** Cuando se realizan modificaciones sobre el sistema, en algunos casos se requiere registrar justificación del cambio realizado, para ello el sistema emite una ventana donde permite detallar la justificación del cambio realizado. Esta podrá ser consultada dentro de los historiales de modificación.

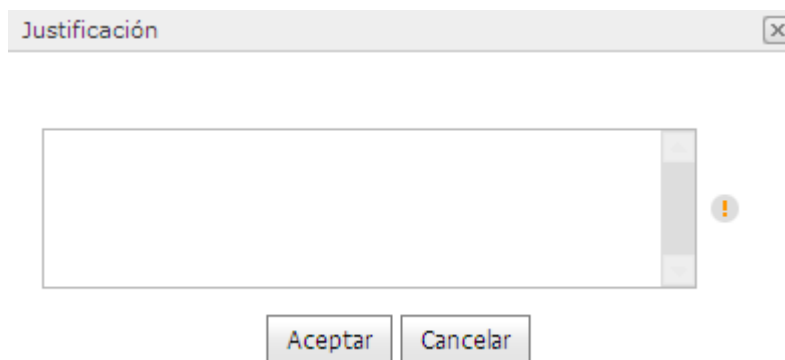


A screenshot of a 'Justificación' (Justification) dialog box. The title bar says 'Justificación' with a close button (X). Below the title bar is a large, empty text area for entering justification. To the right of the text area is a small yellow warning icon (exclamation mark). At the bottom of the dialog are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).


ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

- Mensajes: En el aplicativo PANACEA ®, los mensajes emergentes, se identifican porque las ventanas tienen como título "Mensaje Panacea" y tienen por defecto el foco en el botón aceptar, al pulsar aceptar se cierra la ventana del mensaje emergente:

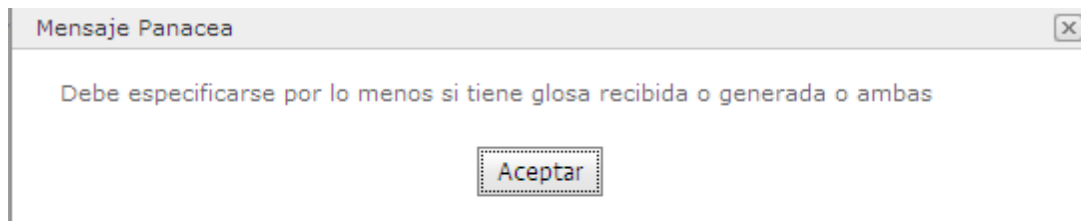

- Marcar / desmarcar todo: En el aplicativo PANACEA ®, para los grid en que se permite hacer selección múltiple, el sistema facilita el seleccionar o des seleccionar todos los registros en una sola acción; al pulsar sobre la primera celda de la columna de check, el sistema marca o desmarca todos los registros; se visualiza un label que indica la operación.

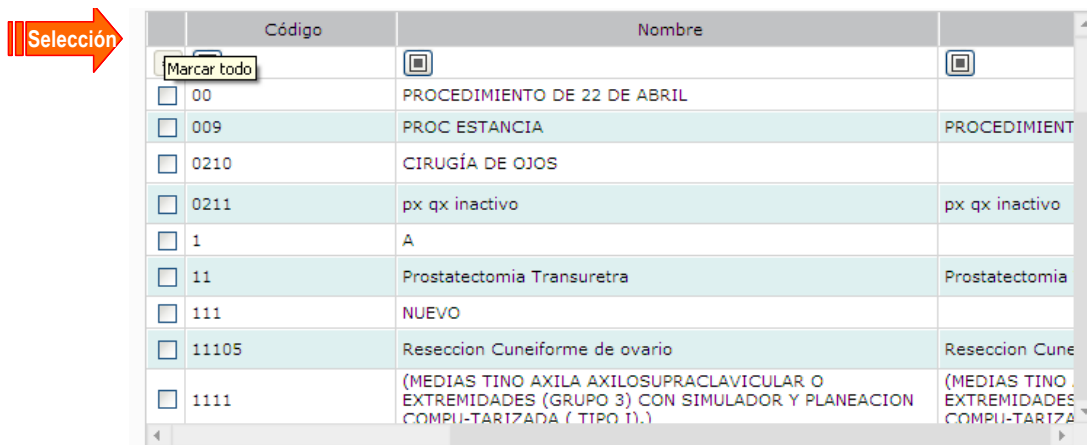


	Código	Nombre	
	Marcar todo		
☐	00	PROCEDIMIENTO DE 22 DE ABRIL	
☐	009	PROC ESTANCIA	PROCEDIMIENT
☐	0210	CIRUGÍA DE OJOS	
☐	0211	px qx inactivo	px qx inactivo
☐	1	A	
☐	11	Prostatectomía Transuretra	Prostatectomía
☐	111	NUEVO	
☐	11105	Reseccion Cuneiforme de ovario	Reseccion Cune
☐	1111	(MEDIAS TINO AXILA AXILOSUPRACLAVICULAR O EXTREMIDADES (GRUPO 3) CON SIMULADOR Y PLANEACION COMPU-TARIZADA (TIPO 1).)	(MEDIAS TINO EXTREMIDADES COMPU-TARIZA

- Filtros en grid: En el aplicativo PANACEA ®, para los grid, sobre cada una de las filas se encuentran las opciones de filtro, el nombre de la fila corresponde al criterio de búsqueda, Ej. Código; se muestran como lista desplegable los operadores disponibles según el tipo de dato, Ej. Igual, diferente, termina con; este se selecciona y se digita en el

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

campo adyacente el texto (valor) a buscar, el sistema filtra y carga en el grid los datos que cumplen con el criterio seleccionado:

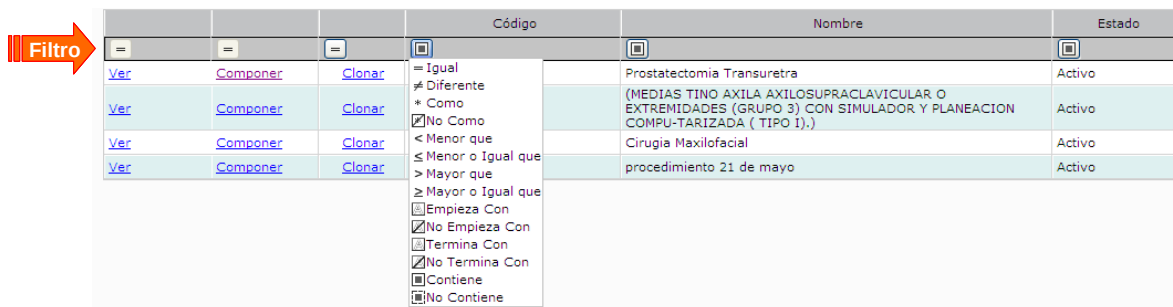

			Código	Nombre	Estado
Ver	Componer	Clonar		Prostatectomía Transuretra	Activo
Ver	Componer	Clonar		(MEDIAS TINO AXILA AXILOSUPRACLAVICULAR O EXTREMIDADES (GRUPO 3) CON SIMULADOR Y PLANEACION COMPU-TARIZADA (TIPO I).)	Activo
Ver	Componer	Clonar		Cirugía Maxilofacial	Activo
Ver	Componer	Clonar		procedimiento 21 de mayo	Activo

Pueden usarse varios criterios, sumando a la búsqueda anterior otro criterio; como se visualiza por ejemplo en la imagen: Primero se realiza el filtro por el tipo de identificación contiene CC y a los datos resultados de esta primera búsqueda se aplica filtro por nombre completo contiene ar; por tanto los resultados visualizados cumplen con la suma de los dos criterios.


Adicionalmente al pulsar los nombres de las columnas se puede reordenar la información.

Usuarios									
		Identificador	Tipo identificación	Numero identificación	Nombre completo	Fecha creación	Estado		
Ver	Editar	auditor_jel	C C	79.956.989	José Esteban Lunares	05/03/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	aux_enfermeria_lmop	C C	52.123.123	Lina Marcela Olarte Pérez	05/03/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	jefe_enfermeria_mch	C C	52.456.789	Maria Chucena	05/03/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	jemartinez	C C	52425793	Jenifer Janeth Martinez Alonso	14/07/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	USU_PRUEBA	C C	123456	USUARIO PRUEBA	04/05/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar

- Presentación de informes: Dentro del sistema PANACEA ®, se tiene la opción en algunas de las ventanas de visualizar listados a manera de informes.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Al pulsar el botón  cuando se tiene un solo informe como opción, el sistema genera el listado de la información solicitada; si para esa opción de menú se encuentra más de una posibilidad de informe, el sistema presenta las opciones para seleccionar la requerida:

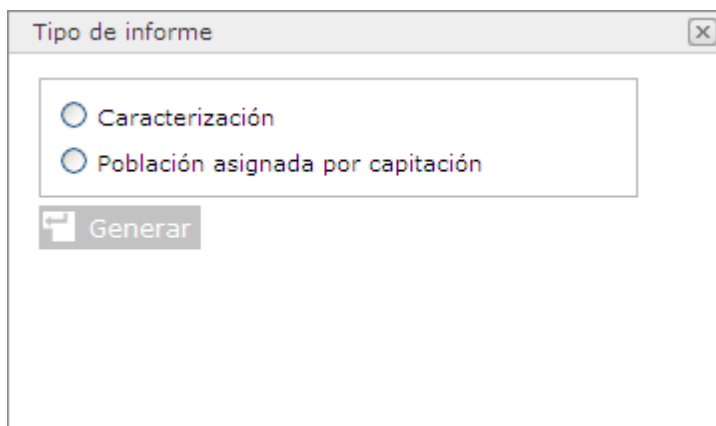

Luego de tener el informe requerido seleccionado se pulsa generar para visualizar la información correspondiente:




ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AFIN
822 - ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
823 - bacteriología 25 mayo	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
381 - Bacteriología	989 - MEDICINA GENERAL
128 - Cardiología	341 - Oncología
425 - CIRUGÍA	137 - Cirujano General
329 - hija 2	
444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA	
333 - MEDICINA FAMILIAR	

Un informe está integrado por 3 partes: Encabezado, cuerpo y pie.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Si existen adicionalmente opciones de agrupación de la información, previo a la visualización, el sistema permite definir estos criterios, Ej. Presentar la información por convenio:

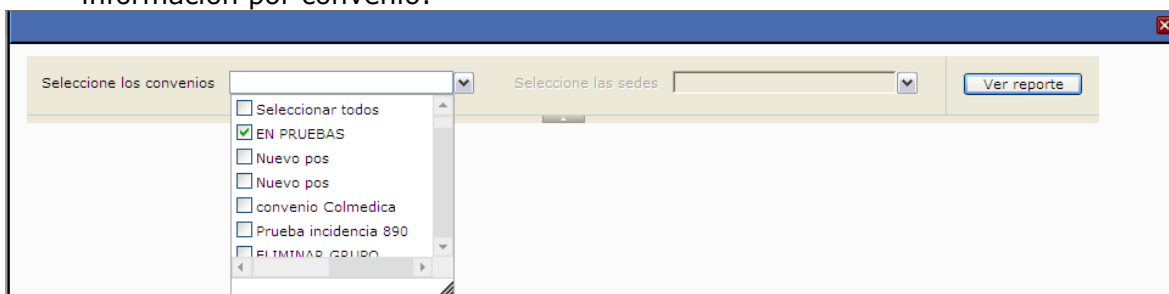

Al marcar los criterios requeridos y pulsar ver reporte, se visualiza la información como se describió anteriormente.

Nota: Los tipos de informes a visualizar, las opciones de agrupación y la obligatoriedad de los mismos están definidos por cada opción del sistema (*ver cada uno de los manuales*).

Encabezado: En la parte superior de la ventana donde se muestra el informe se tienen las acciones: avanzar / retroceder entre páginas, aumentar / disminuir el tamaño de la visualización, buscar, exportar, actualizar, imprimir.


- avanzar / retroceder entre páginas: Cuando la cantidad de resultados mostrados en el informe superan el tamaño de una ventana, el sistema los muestra paginados; brindando la opción de desplazamiento entre páginas, ya sea una a una con los botones de flecha simple o permitiendo ir al primer o último registro con la opción correspondiente a primera o última página:




ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	


- aumentar / disminuir el tamaño de la visualización: Se brinda la opción de aumentar o disminuir el tamaño de presentación de la información en pantalla por medio de porcentajes que van desde el 10 % hasta el 500%. Por defecto los informes se muestran en 100%.

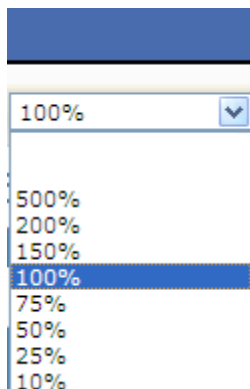

- Buscar: Esta opción permite hacer búsquedas dentro de los registros del informe, para ello se debe relacionar parte del texto a ubicar y luego pulsar buscar; teniendo ubicada una coincidencia, la opción buscar siguiente, permite saldar a la siguiente coincidencia.

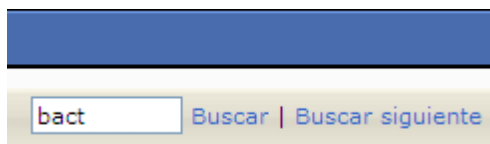


- Exportar: La información del informe presentada en pantalla puede ser llevada a diversos formato, las posibilidades son: XML, PDF, HTML, Excel, TIFF y Word.

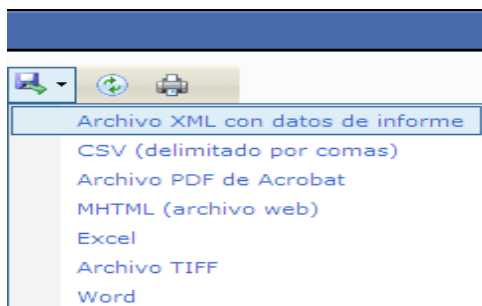


	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	


- Actualizar: Esta opción permite refrescar la información que se visualiza en pantalla.

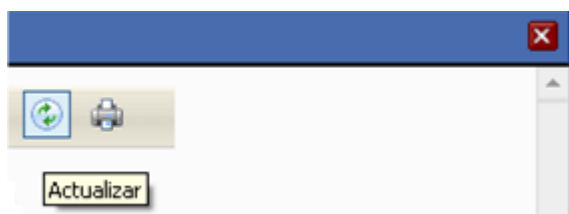

- Imprimir:

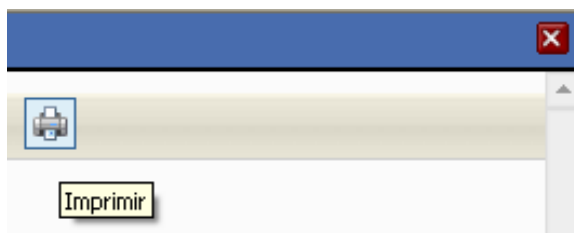

Esta opción lleva a la ventana de diálogo habitual del sistema operativo para realizar impresiones:

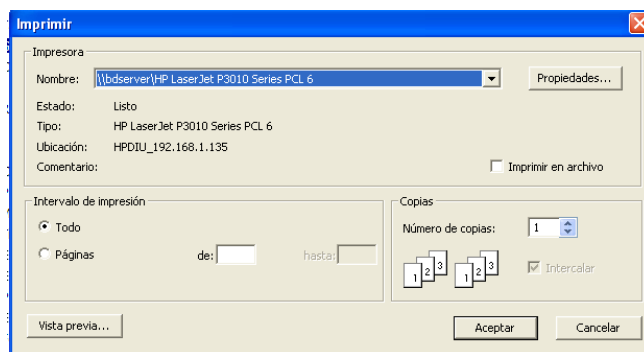

Nota: El manejo de las impresoras no es administrado por PANACEA, sino por el sistema operativo de cada estación de trabajo, dando al usuario la flexibilidad de establecer los parámetros predeterminados de impresión, o cambiar de impresora en el momento que lo requiera.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)


	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Es posible que para que se visualicen las impresoras configuradas, el sistema solicite se instale un control ActiveX:



Debe realizarse la instalación para un correcto funcionamiento de la opción imprimir.

Como parte del encabezado se encuentra una sección donde se visualiza el nombre del informe generado e información de la IPS, como nombre, de número de identificación, slogan, dirección y teléfono de ubicación:

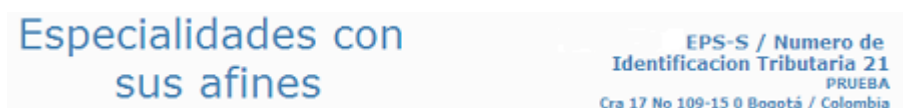

Cuerpo: Dentro del cuerpo se visualiza el detalle del informe, en los casos en que aplica la información puede contraerse o expandirse para ver detalle, por defecto el sistema muestra la opción expandida:

ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AFIN
 022 - ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	
	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
 023 - bacteriología 21 mayo	
 381 - Bacteriólogo	341 - Ginecología

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Pie: En la parte inferior del informe se visualiza la fecha y hora de generación, usuario que lo genera, sede, equipo desde donde se genera, número de páginas del informe usando el formato del número de página con respecto al total de páginas (m de n):

8/2/2010 2:10 PM
DESARROLLO22.intranet.c
nt.com.co

Panacea

1 de 2
Sede activa 21

- Autocompletar en combos: Para facilitar la selección en combos simples, el sistema tiene la función de autocompletar, cuando se inicial la escritura de una palabra en el combo, el sistema va realizando filtro de las opciones con coincidencias, mostrándolas como primera opción.

País

Colombia
COLOMBIA cf
Colombia load test

- Registro de fechas y horas en el aplicativo PANACEA ®: En los campos donde se requiere registrar fechas puede realizarse seleccionando esta del calendario que se muestra en el campo, o puede digitarse la fecha en el campo usando formato dd-mm-aaaa (dd/mm/aaaa). El calendario tiene como opciones el ir al día de hoy, el limpiar la selección y permite desplazarse mes a mes o año a año pulsando la flecha simple a izquierda para ir al mes anterior, flecha simple a derecha para ir al mes siguiente y flecha doble a izquierda para ir al año anterior, flecha doble a derecha para ir al año siguiente:

Fecha inicial * 12-12-2010

Fecha final *

12-12-2011

<< < diciembre de 2011 > >>

	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
48	27	28	29	30	1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31
01	1	2	3	4	5	6	7

Hoy
Limpiar

Desplazamiento entre
meses o años

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

El calendario solo tendrá habilitadas las fechas posibles a asignar, por ejemplo, si para un campo la fecha no puede ser menor a la actual, los días anteriores estarán deshabilitados.

Para el registro de horas dentro del aplicativo se tiene un campo como el que se visualiza en la imagen:



Este maneja el formato de hora am / pm y por defecto el sistema muestra para la hora las 12:00 am.

Si se desea definir una hora, esta puede digitarse dentro del control detallando horas, minutos y en el formato de hora la característica am / pm requerida; o por medio de las flechas de desplazamiento (arriba / abajo) aumentar o disminuir uno a uno las horas o minutos, dependiendo de la ubicación del cursor; si se encuentra antes de los dos puntos modifica la hora, si se encuentra entre los dos puntos y el inicio del formato de hora se modifican los minutos y si se encuentra ubicado en el formato de hora pasa de am a pm y viceversa.

- Registro de rangos de edad en el aplicativo PANACEA ®: En las opciones donde se requiere el registro de rangos de fechas de aplicación se visualiza una ventana para registrar grupos y condiciones:

Criterio	Edad	Unidad medida	Conector		
Nuevo grupo	Nueva condición	<input checked="" type="button" value="Aceptar"/>			
Número grupos	Condición	Operador	Edad	Unidad	Conector

Para iniciar la parametrización debe pulsarse el botón **Nuevo grupo** en este momento se habilita la parte superior de la ventana para permitir el registro de una condición, para lo cual se debe definir el criterio, la edad, la unidad de medida de la edad y el conector:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Criterio:
Edad:
Unidad medida:
Conector:

Las opciones posibles del campo criterio son: Igual, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual; debe seleccionarse una.

En el campo edad debe registrarse la edad para la cual aplica la condición, el valor máximo definido en el sistema es 150.

En el campo unidad de medida de la edad de la edad se muestran las opciones años, meses y días, seleccione la unidad de medida para la condición que está creando.

En el campo conector las opciones válidas son: Y / O / Ninguno, si desea cerrar el grupo, es decir no adicionar más condiciones use el conector ninguno.

Si desea adicionar otra condición al grupo seleccione el conector dependiendo si se quiere que las condiciones sean incluyentes es decir que se requiera que se cumplan ambas, en ese caso la opción es Y, si se quiere que aplique una cualquiera de las dos condiciones seleccione el conector O.

Cuando se tenga definida la condición al pulsar el botón  Así la condición quedará registrada en el grid inferior:

Número grupos	Condición	Operador	Edad	Unidad	Conector
1	1	Mayor	4	Años	Y

En este se visualizan adicionalmente a la información registrada las columnas, número grupos y número condición, las cuales identifican la cantidad de grupos creados y las condiciones adicionadas en cada grupo.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Si el conector usado fue ninguno, se da cierre al grupo, no se permite agregar otra condición a este.

Si el conector selecciona fue Y / O al seleccionar la condición en el grid, se habilita el botón

Nueva condición

Al pulsarlo se habilita la sección superior para crear la nueva condición de la misma forma en que se ha descrito anteriormente; se muestran bloqueados los campos unidad de medida, este refleja la unidad seleccionada en la condición anterior, es decir que para el grupo se maneja la misma unidad de medida de la edad y el conector ya que como esta condición cierra el grupo está por defecto en ninguno.

Para evitar conflictos de cruces de rangos de edad, solo se podrán colocar máximo 2 condicionantes por grupo.

Se realiza validación entre las edades en un grupo para que no se repita la edad, si existen se informa y no permite agregar.


Para crear un nuevo grupo se repiten los pasos anteriores

Al crear un nuevo grupo se valida que la edad no esté contenida en otro grupo, si lo está informa y no permite la creación.

Para editar se selecciona el registro del grid, en este momento se carga la información en la parte superior y permite modificar.

Al editar un grupo completo, si el operador es ninguno, este no se podrá cambiar. Si el operador es Y/O no se podrá cambiar a ninguno, se podrán cambiar entre ellos (de Y a O y de O a Y)

Para borrar, se selecciona el registro que se desea borrar y se pulsa la opción suprimir del teclado (tecla **supr / delete**) , en este momento el sistema emite el mensaje de confirmación:

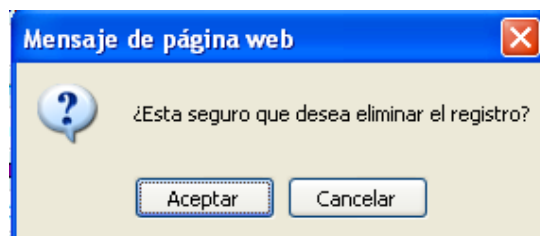

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Al pulsar cancelar, no se lleva a cabo la operación de eliminación del registro. Si se confirma la operación con el botón aceptar, el registro es eliminado del grid. Al borrar una condición, si es la que posee el ninguno como conector se pregunta si se desea cerrar el grupo si es así, se coloca ninguno a la condición que queda, sino se permite adicionar una nueva condición como se describió anteriormente.

Para los casos en que adicional a la definición de rango de edad se registra un dato adicional, por ejemplo una puntuación, este campo o campos se habilitarán hasta que el grupo esté cerrado.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

2. PRERREQUISITOS

2.1 Inicio De Sesión

Cuando se requiera hacer uso del sistema de información PANACEA®, el usuario debe autenticarse con su respectivo nombre de usuario y contraseña, para tener acceso al sistema y poder hacer uso de este módulo, es importante tener en cuenta que las acciones a realizar por el usuario están definidas por la asignación de permisos. (Ver manual de seguridad, crear perfiles sección 3.1).

2.2 Tablas del Sistema

Se requiere las tablas del sistema:

- Tipos unidad de medida: Cantidad / tiempo / longitud / superficie / volumen sólido / volumen líquido / presión / temperatura / masa / eléctricas / fuerza / frecuencia / energía / velocidad / potencia / ángulo / aceleración / información / dosis de radiación / radiactividad.
- Unidades de medida: Varían de acuerdo a cada tipo de unidad de medida

2.3 Tablas Básicas

Se requieren las tablas básicas:

- Grupo nutriente
- Tipo dieta
- Sub tipo de dieta
- Tiempos de comida

2.4 Crear Nutrientes

Para el módulo nutrición se requiere tener creado los nutrientes (Ver Manual Nutrición, sección 3.1 Crear Nutrientes de este documento)

2.5 Crear Menú/Plato

Para el módulo nutrición se requiere tener creado Menú/Plato (Ver Manual Nutrición, sección 3.2 Crear Menú / Plato de este documento)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

2.6 Crear Diagnósticos

Para el módulo nutrición se requiere tener creado los diagnósticos (Ver Manual protocolos y diagnósticos, sección 3.1 Crear Diagnósticos)

2.7 Crear Artículos Administrativos

La Creación de alimentos para cada uno de los cuales se indican la cantidad y unidad de medida de cada componente nutricional con los respectivos totales, incluir diagnósticos para los cuales es contraindicado.

Para el módulo Nutrición se requiere tener creados artículos administrativos (Ver manual farmacia, crear artículos administrativos sección 3.3)

2.8 Crear Artículos Asistenciales

Para el módulo Nutrición se requiere tener creados artículos asistenciales (Ver manual farmacia, crear artículos asistenciales sección 3.2)

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)


3. USO DEL APLICATIVO MODULO NUTRICIÓN

A continuación se detalla cada una de las opciones del módulo Nutrición:

3.1 Crear Nutrientes


- Nutrientes

Ruta: Menú Asistencial → Nutrición → Nutrientes

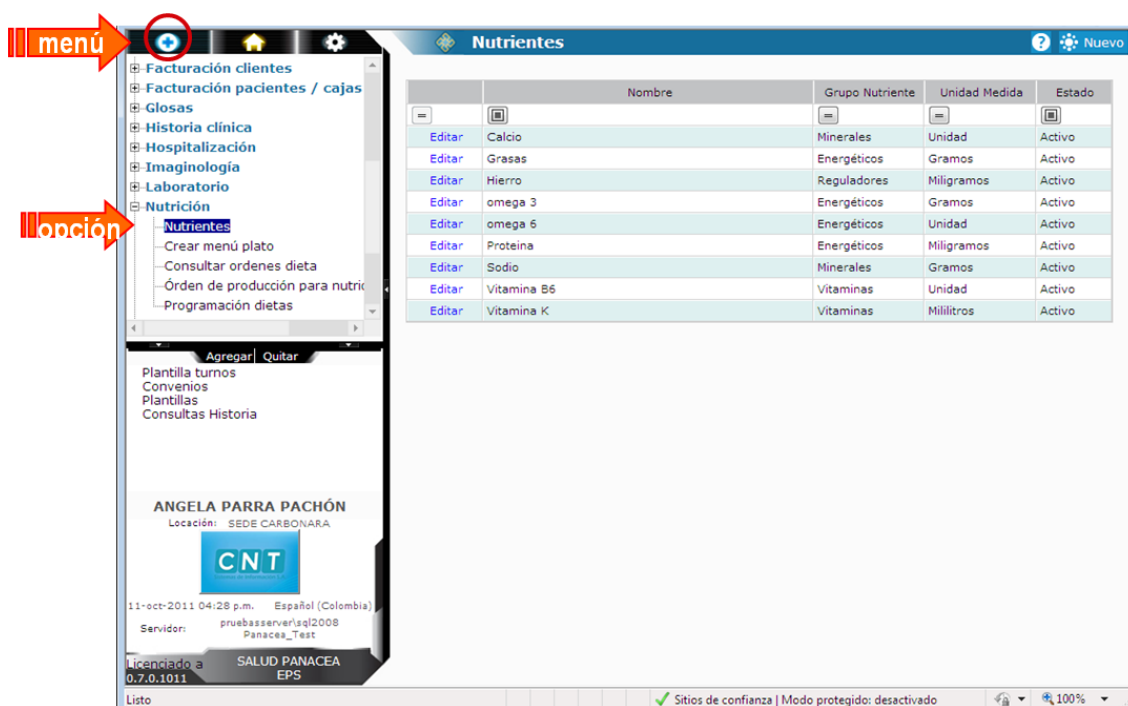

Al ingresar a la opción crear nutrientes, se visualizan el botón de acción nuevo, el grid con las columnas nombre, Grupo Nutriente, Unidad Medida y estado se encuentra visualizados los nutrientes ya creados.

Para crear un nuevo nutriente pulse el botón

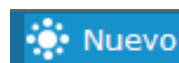


en este momento se muestra la ventana para creación.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

En esta ventana para la creación del nuevo nutrientes se empieza a diligenciar los datos requeridos:

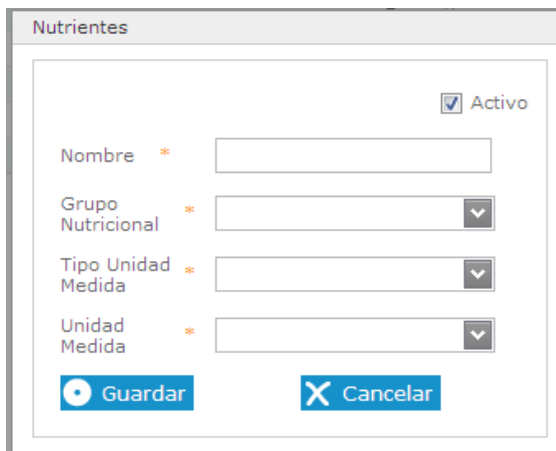

Al ingresar a la ventana para crear el nutriente se visualiza los botones de acción cancelar y guardar.

Para ingresar el nutriente se digita el nombre. Y luego en el grupo nutricional se selecciona al grupo que va a pertenecer el nutriente que se está creando.



En el Grupo Nutricional el combo muestra los diferentes tipos de grupos nutricionales creados en las tablas básicas y que estos se encuentren activos. (Para conocer la creación de las tablas básicas, ver manual de parametrización, sección 3.1 Tablas Básicas/Nutrición/Grupo de Nutrientes)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)


	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Luego de seleccionar el Grupo Nutricional al que va a pertenecer el nutriente que se está creando, se continúa con el Tipo Unidad de medida al que pertenece ese nutriente.



El Tipo de Unidad de medida en el combo se selecciona a la que va ha pertenecer el nutriente que se está creando. (Estas unidades de medida se encuentran almacenadas en las tablas del sistema)

Luego se dé seleccionado el Tipo Unidad Medida esta activa automáticamente, el combo al que pertenece la Unidad de medida a seleccionar.

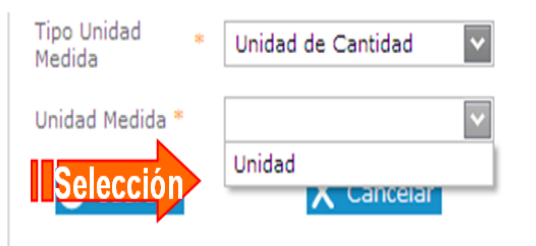

Cuando en el Tipo Unidad Medida se ha seleccionado en el combo de Unidad Medida esta muestra las diferentes unidades en las cuales se puede escoger y seleccionar para poder medir el nutriente que se está creando.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27 VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	 Sistemas de Información S.A.
---	---	---	---

Luego por defecto el nutriente a crear esta en estado activo.  **Activo**, si se desea modificar el estado, desmarque el check para inactivar el estado del nutriente.

Realice la parametrización correspondiente y presione el botón guardar. 

Al pulsar guardar se valida que se encuentren incluidos en cada una de las pestañas los datos marcados como obligatorios, si falta alguno se informa y no se permite guardar. *(Para conocer el detalle de las validaciones ver sección 1.2 generalidades panacea, validación de obligatoriedad y formato del presente documento).*

Si la información está completa, al pulsar guardar el sistema informa el guardado éxito, como se describe en la sección 1.2 generalidades PANACEA, confirmación de operaciones del presente documento.

El botón  ejecuta las acciones descritas en la sección 1.2 generalidades PANACEA, cancelar del presente documento.

- Consultar nutrientes: Al ingresar a la opción Nutrientes se visualiza el grid inicial donde se encuentran los nutrientes previamente creados, permitiendo realizar filtros por nombre, Grupo nutriente, unidad medida y estado *(Ver sección 1.2 generalidades panacea, filtros en grid)*

Nutrientes   Nuevo				
	Nombre	Grupo Nutriente	Unidad Medida	Estado
				
Editar	Calcio	Minerales	Unidad	Activo
Editar	Grasas	Energéticos	Gramos	Inactivo
Editar	Hierro	Reguladores	Miligramos	Activo
Editar	omega 3	Energéticos	Gramos	Activo
Editar	omega 6	Energéticos	Unidad	Activo
Editar	Proteína	Energéticos	Miligramos	Activo
Editar	Sodio	Minerales	Gramos	Activo
Editar	Vitamina B6	Vitaminas	Unidad	Activo
Editar	Vitamina k	Vitaminas	Unidad	Activo


- Modificar Nutrientes: Para realizar las modificaciones a un registro previamente creado, se busca el registro *(ver sección 3.1 crear nutrientes, consultar del presente documento)*; en el grid se visualiza la opción editar; al pulsarla se ingresa a la ventana con la información parametrizada en modo de edición; es posible modificar las parametrizaciones realizadas.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Al pulsa  se almacenan las modificaciones realizadas, el sistema realiza las mismas validaciones descritas en la creación (ver sección 3.1 crear nutrientes, de este documento).

- Eliminar Nutrientes : Para realizar la eliminación de un registro previamente creado, se busca el registro (ver sección 3.1 crear nutrientes, consultar de este documento) ; en el grid se selecciona el registro que se desea borrar y se pulsa la opción suprimir del teclado (tecla **supr / delete**) , en este momento el sistema emite el mensaje de confirmación:

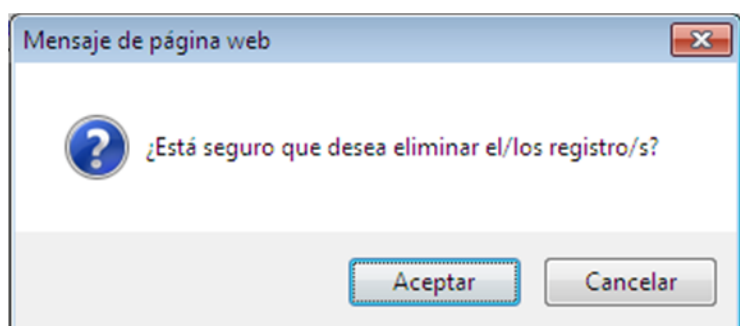

Al pulsar cancelar, no se lleva a cabo la operación de eliminación del registro. Si se confirma la operación con el botón aceptar, el registro es eliminado del grid; en este momento se emite el mensaje de confirmación como se describe en la las generalidades PANACEA, (ver sección 1,2 generalidades panacea, confirmación de operaciones del presente documento).

Si al confirmar la eliminación del registro y el sistema detecta que por integridad referencial no se puede eliminar, este genera un mensaje notificando al usuario que no se puede eliminar, se sugiere inactivar.


- Haga clic en el botón informes,  el sistema carga la siguiente ventana.

Se le indica al combo de Grupo Nutrientes y desea ver un grupo específico o todos a la vez, haga clic en Ver Reporte y el sistema traerá los Grupo Nutrientes relacionados, como se muestra en la siguiente figura.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)



Cuando se ha seleccionado un grupo específico del Grupo de nutrientes.

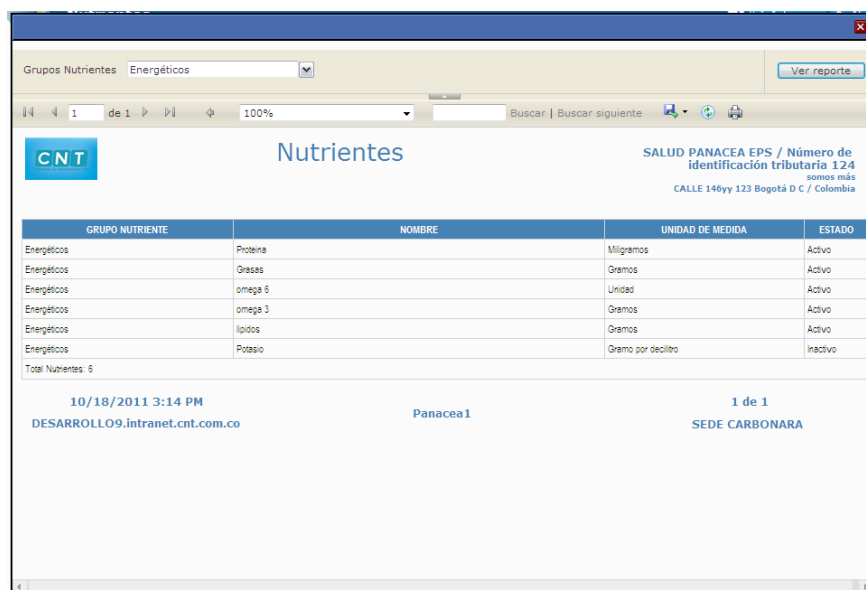

GRUPO NUTRIENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO
Energéticos	Proteína	Miligramos	Activo
Energéticos	Grasas	Gramos	Activo
Energéticos	omega 6	Unidad	Activo
Energéticos	omega 3	Gramos	Activo
Energéticos	lípidos	Gramos	Activo
Energéticos	Potasio	Gramo por decilitro	Inactivo

Total Nutrientes: 6

10/18/2011 3:14 PM
DESARROLLO9.intranet.cnt.com.co

Panacea1

1 de 1
SEDE CARBONARA

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Cuando se selecciona todos los grupos de nutrientes

Grupos Nutrientes
Energéticos, Minerales, Regulad
Ver reporte

1 de 1
100%
Buscar | Buscar siguiente


Nutrientes

SALUD PANACEA EPS / Número de
identificación tributaria 124
somos más
CALLE 146yy 123 Bogotá D C / Colombia

GRUPO NUTRIENTE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO
Energéticos	Proteína	Miligramos	Activo
Energéticos	Grasas	Gramos	Activo
Energéticos	omega 6	Unidad	Activo
Energéticos	omega 3	Gramos	Activo
Energéticos	lipidos	Gramos	Activo
Energéticos	Potasio	Gramo por decilitro	Inactivo
Minerales	Sodio	Gramos	Activo
Reguladores	Calcio	Unidad	Activo
Reguladores	Hierro	Miligramos	Activo
Vitaminas	Vitamina B6	Unidad	Activo
Vitaminas	vitamina c	Centimetros	Activo
Total Nutrientes: 11			

10/18/2011 3:16 PM
DESARROLLO9.intranet.cnt.com.co

Panacea1


1 de 1
SEDE CARBONARA

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

3.2 Crear Menú Plato


- Crear Menú Plato:

Ruta: Menú Asistencial → Nutrición → Crear Menú Plato

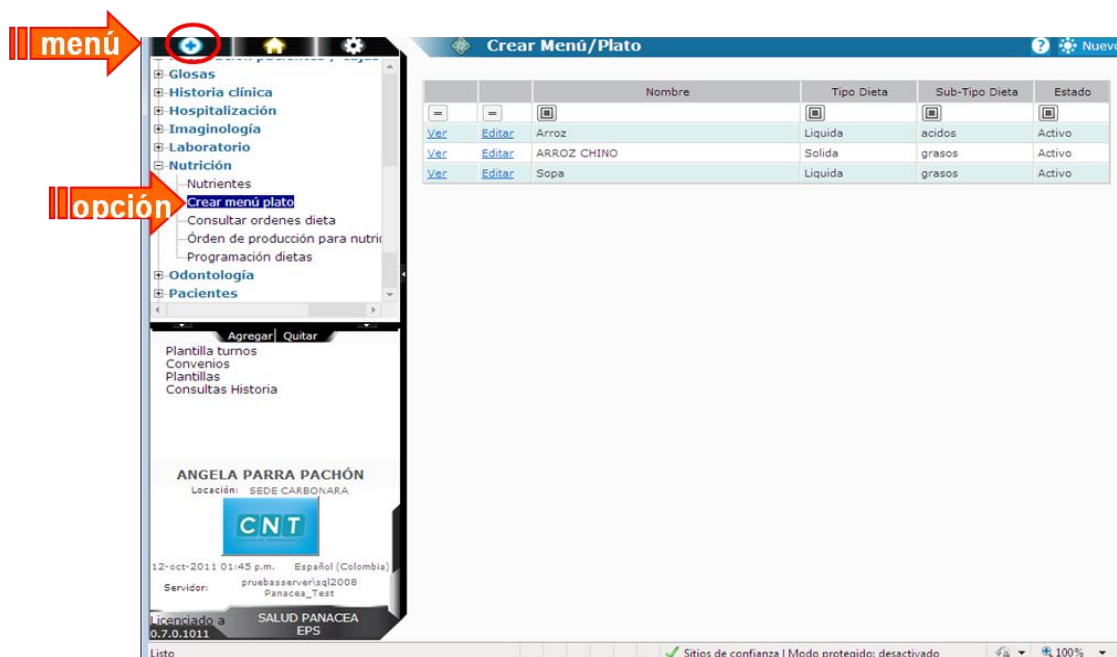


Al ingresar por la opción crear menú plato, se muestra la ventana de creación donde se visualiza como botón de acción nuevo y el grid con las columnas nombre, Tipo Dieta, Sub-Tipo Dieta y estado.

Para crear un nuevo menú plato se pulsa el botón

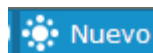

Al pulsar nuevo se abre la ventana de creación donde se visualizan el check activo predeterminado, botones de acción guardar y cancelar en la parte superior.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

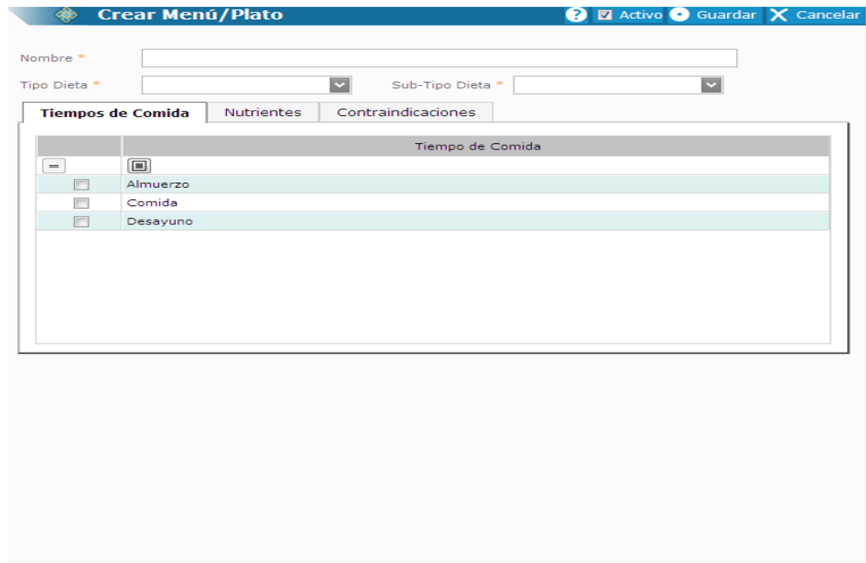


Para iniciar la creación del nuevo menú o plato se llenan los datos requeridos:

Se ingresa el nombre plato.



Si el nombre ya existe entonces este genera un mensaje indicando:

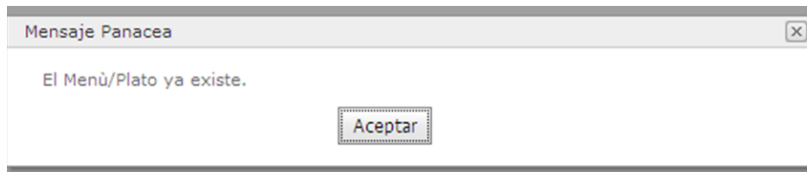


ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)


	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Por lo tanto lo borra y permite que genere un nuevo nombre del plato. Para continuar con el proceso.

Se debe seleccionar el combo de Tipo de Dieta y Sub Tipo de dieta esta se despliega mostrando una lista de tipos de dietas y sub- tipos creados y activos. (Ver *Manual de Parametrización*, sección 3.1 Tablas Básicas/ Historia Clínica/Tipo Dieta y Sub Tipo Dieta)

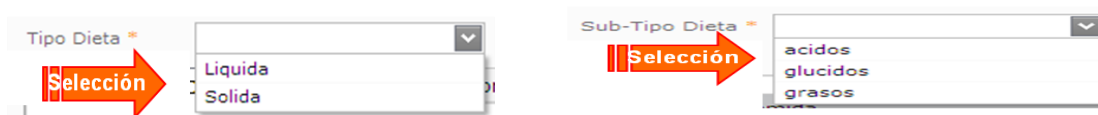

Se visualiza las pestañas de Tiempos de comida, Nutrientes y Contraindicaciones.

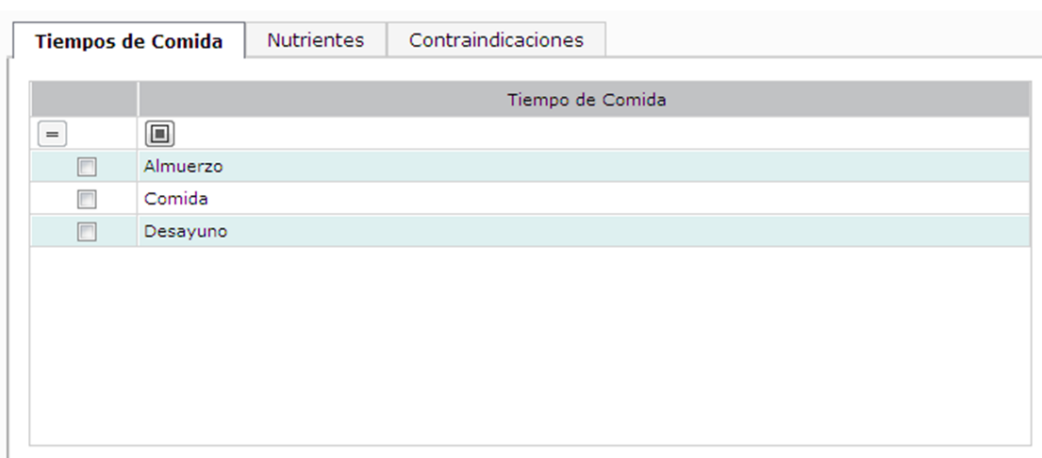

La pestaña de Tiempo de Comida permite visualizar los creados y activos (Ver *Manual Parametrización*, sección 3.1 Tablas Básicas/ Parametrización/ Historia Clínica/ Tiempos de Comida) y los seleccionados serán los que se aplicaran únicamente para el plato que se está generando.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

La pestaña de nutrientes muestra un listado de nutrientes creados (ver sección 3.1 crear nutrientes, del presente documento), el grid con las columnas nutriente, Unidad de Medida, Cantidad.

Tiempos de Comida | **Nutrientes** | Contraindicaciones

	Nutriente	Unidad de Medida	Cantidad
☐	Grasas	Gramos	
☐	omega 3	Gramos	
☐	Proteina	Miligramos	
☐	omega 6	Unidad	
☐	Sodio	Gramos	
☐	Hierro	Miligramos	
☐	Calcio	Unidad	
☐	Vitamina B6	Unidad	
☐	Vitamina k	Unidad	

Grupo Nutriente	Unidad de Medida	Cantidad

En la pestaña de nutrientes se selecciona y se le agrega la cantidad a cada nutriente que esta proporcionado el plato. En el segundo grid con columnas de Grupo Nutriente, Unidad de Medida y Cantidad va mostrando el total por grupo de nutrientes del menú o plato que se está creando.

Crear Menú/Plato ? ☒ Activo ☐ Guardar

Nombre *

Tipo Dieta * Sub-Tipo Dieta *

Tiempos de Comida | **Nutrientes** | Contraindicaciones

	Nutriente	Unidad de Medida	Cantidad
☒	Grasas	Gramos	10
☐	omega 3	Gramos	
☒	lipidos	Gramos	90
☒	Proteina	Miligramos	100
☐	omega 6	Unidad	
☐	Sodio	Gramos	
☒	Hierro	Miligramos	50
☐	Calcio	Unidad	

Grupo Nutriente	Unidad de Medida	Cantidad
Energéticos	Gramos	100
Reguladores	Miligramos	50

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

El botón  ejecuta las acciones descritas en la sección 1.2 generalidades PANACEA, cancelar del presente documento.

- Consultar Crear Menú/Plato: Al ingresar a la opción crear Menú/Plato se visualiza el grid inicial donde se encuentran los platos previamente creados, permitiendo realizar filtros por nombre, Tipo de Dieta, Sub-Tipo de Dieta, Estado (Ver sección 1.2 generalidades panacea, filtros en grid)


En el grid se encuentra la opción ver, al pulsar sobre ella y se ve la información del plato creado.

 Crear Menú/Plato ? Nuevo					
		Nombre ▲	Tipo Dieta	Sub-Tipo Dieta	Estado
					
Ver	Editar	Arroz	Liquida	acidos	Activo
Ver	Editar	ARROZ CHINO	Solida	grasos	Activo
Ver	Editar	Sopa	Liquida	grasos	Activo
Ver	Editar	sopa de colicero	Liquida	grasos	Activo


- Modificar Crear Menú/Plato: Para realizar las modificaciones a un registro previamente creado, se busca el registro (ver sección 3.2 crear menú/plato, consultar del presente documento); en el grid se visualiza la opción editar; al pulsarla se ingresa a la ventana con la información parametrizada en modo de edición; es posible modificar las parametrizaciones realizadas.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

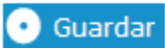Al pulsa  se almacenan las modificaciones realizadas, el sistema realiza las mismas validaciones descritas en la creación (ver sección 3.1 crear nutrientes).

- Eliminar Crear Menú/Plato : Para realizar la eliminación de un registro previamente creado, se busca el registro (ver sección 3.2 crear Menú/Plato, consultar) ; en el grid se selecciona el registro que se desea borrar y se pulsa la opción suprimir del teclado (tecla **supr / delete**) , en este momento el sistema emite el mensaje de confirmación:

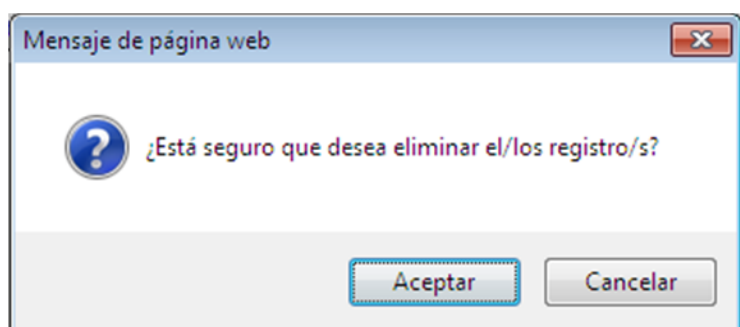


Al pulsar cancelar, no se lleva a cabo la operación de eliminación del registro. Si se confirma la operación con el botón aceptar, el registro es eliminado del grid; en este momento se emite el mensaje de confirmación como se describe en la las generalidades PANACEA, (ver sección 1,2 generalidades panacea, confirmación de operaciones del presente documento).

Si al confirmar la eliminación del registro y el sistema detecta que por integridad referencial no se puede eliminar, este genera un mensaje notificando al usuario que no se puede eliminar, se sugiere inactivar.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

- Haga clic en el botón informes,  el sistema carga la siguiente ventana.

En la ventana se le puede dar clic en el check de nulo que corresponde a generar todos los Menús/Platos y haga clic en Ver Reporte y el sistema genera el reporte de todos los Menús/Platos

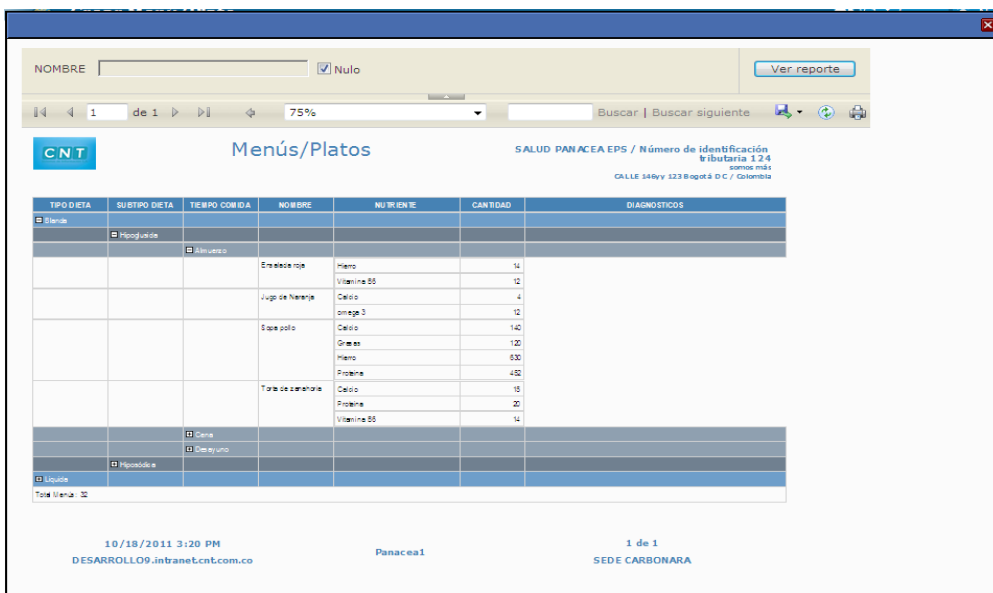


TIPO DIETA	SUBTIPO DIETA	TIEMPO COMIDA	NOMBRE	NUTRIENTE	CANTIDAD	DIAGNOSTICOS
Blanda	Hipoproteico	Almuerzo	Sopa pollo	Hierro	14	
				Vitamina B6	12	
			Jugo de Naranja	Calcio	4	
				omega 3	12	
			Sopa pollo	Calcio	140	
				Grasas	120	
				Hierro	630	
				Proteína	452	
			Tarta de zanahoria	Calcio	18	
				Proteína	20	
				Vitamina B6	14	

Total ítem: 12

10/18/2011 3:20 PM DESARROLLO9.intranet.cnt.com.co Panacea1 1 de 1 SEDE CARBONARA

O indicarle el nombre del Menú/Plato que lo muestre únicamente. Haga clic en Ver Reporte y el sistema genera el reporte del Menús/Platos creado

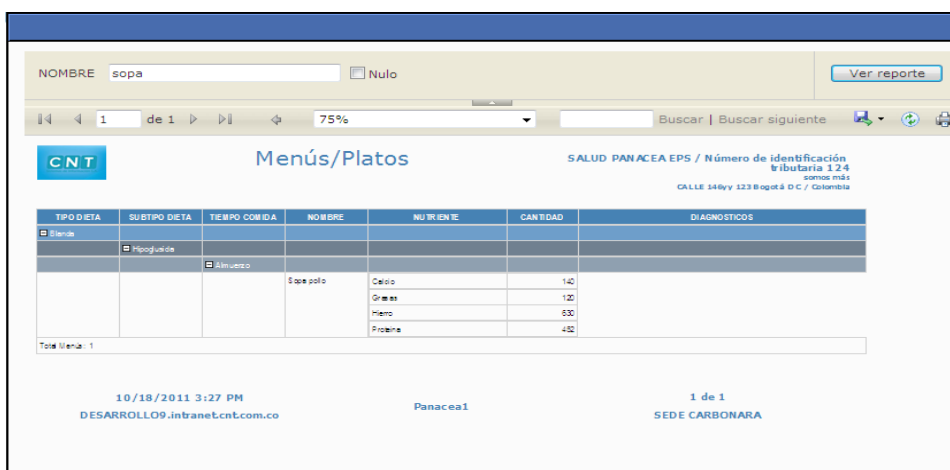

TIPO DIETA	SUBTIPO DIETA	TIEMPO COMIDA	NOMBRE	NUTRIENTE	CANTIDAD	DIAGNOSTICOS
Blanda	Hipoproteico	Almuerzo	Sopa pollo	Calcio	140	
				Grasas	120	
				Hierro	630	
				Proteína	452	


Total ítem: 1

10/18/2011 3:27 PM DESARROLLO9.intranet.cnt.com.co Panacea1 1 de 1 SEDE CARBONARA


ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

3.3 Realizar Programación de Dietas

Ruta: Menú Asistencial → Nutrición → Programación de dietas

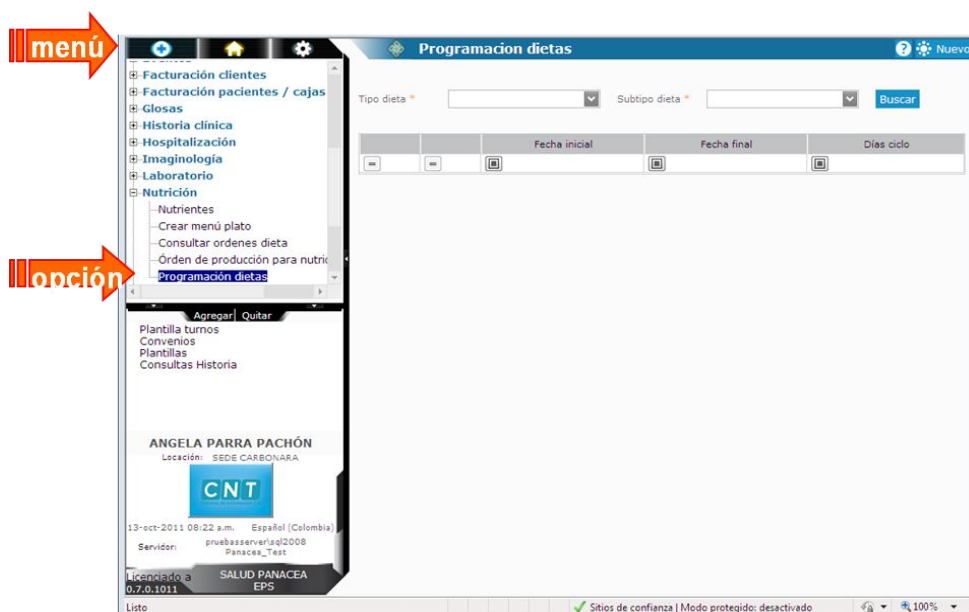


Al ingresar a la opción de Programación de dietas se visualiza el botón de Nuevo y se encuentra las opciones de Tipo Dieta y Subtipo Dieta con su correspondiente combo para seleccionar y se genera la opción en el botón buscar y el grid con las columnas de Fecha inicial, Fecha Final y días ciclo.

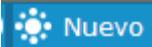Para crear una nueva Programación Dietas pulse el botón .

Se despliega la ventana con el formulario para realizar la parametrización, donde se visualizan como opciones guardar y cancelar.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

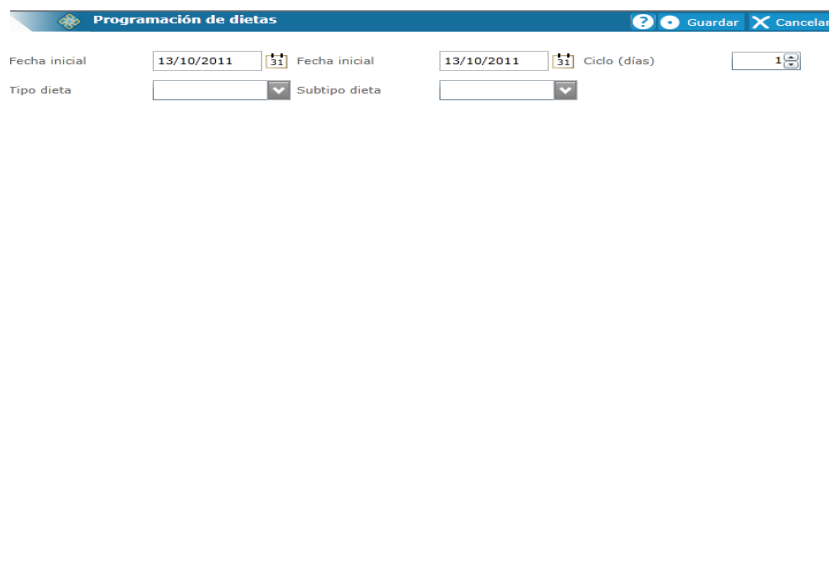

Para inicializar en la creación de dietas se visualiza el formato de fechas iniciales y final el cual se selecciona para la programación de dieta en ese determinado tiempo y Ciclo (días) es para la programación que se aplicará.

Para la selección de la fechas de la creación de la programación de dietas se debe tener en cuenta que fecha inicial no se puede asignar a una fecha anterior que la actual y se le asigna la fecha final no puede ser inferior a la fecha inicial; luego se le asigna los ciclos (días) para los cuales se le va asignar la programación estos ciclos son de 1 a 7 días los cuales corresponden a la semana.

Fecha inicial Fecha final Ciclo (días)

Selecciona el tipo de dieta y el subtipo de dieta que corresponden al programa de la dieta que se están generando.

Tipo dieta

Subtipo dieta

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Después de seleccionar el tipo dieta y subtipo dieta se despliega una serie de ventanas las cuales indica:

Días del Ciclo: que corresponde al número de días que asigno para la programación.


Tiempos de comida: corresponden a los tiempos (Almuerzo, Cena, Desayuno) (ver manual de parametrización, sección 3.1 Tablas Básicas/Historia/Tiempo de comida)

En la otra ventana encontramos los nutrientes, la cantidad por nutrientes y la unidad de medida del nutriente

Menú: Esta ventana muestra los menús que están creados (ver sección 3.2 crear menú/plato, del presente documento), y están asignados a un tiempo de comida. Solamente aparecerán cuando se seleccione el tiempo de comida


Alimentos: son los alimentos creados en Artículos administrativos (Ver manual farmacia, crear artículos administrativos sección 3.3)

Programación: en esta ventana se le agrega el menú y/o alimento al día del ciclo y al tiempo de comida que se ha seleccionado anteriormente

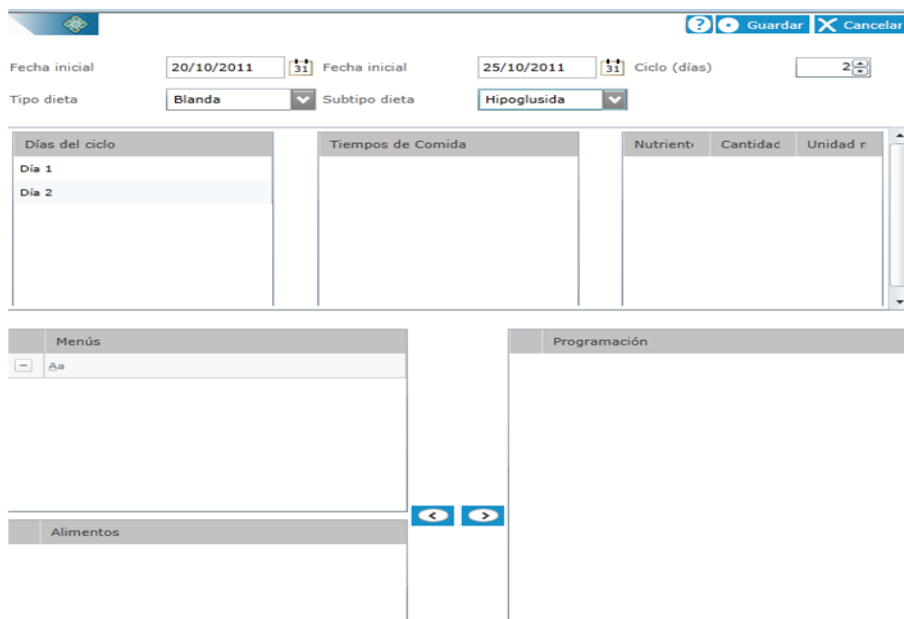


	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Cuando seleccionamos el día del ciclo este muestra el tiempo de comida que está creado.

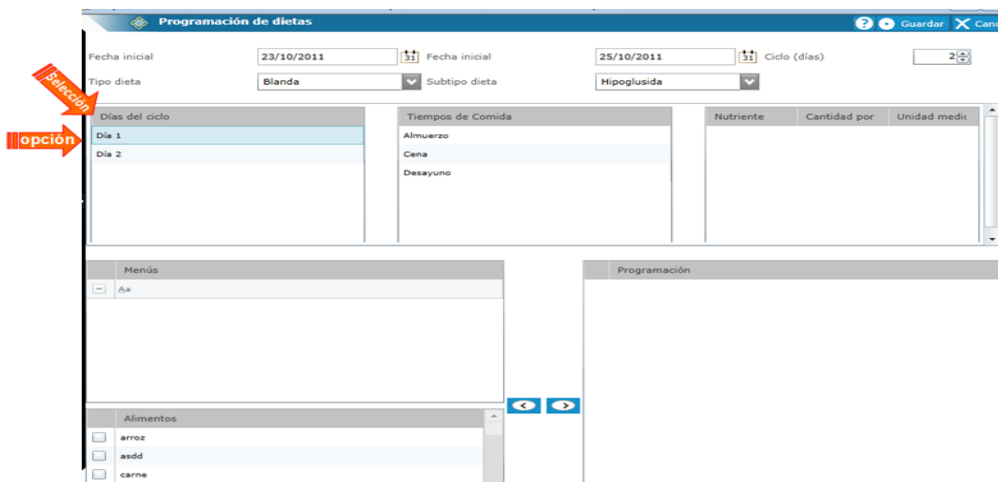


Luego de se selecciona el tiempo de comida y este muestra en la ventana Menús, los menús creados para este tiempo de comida.

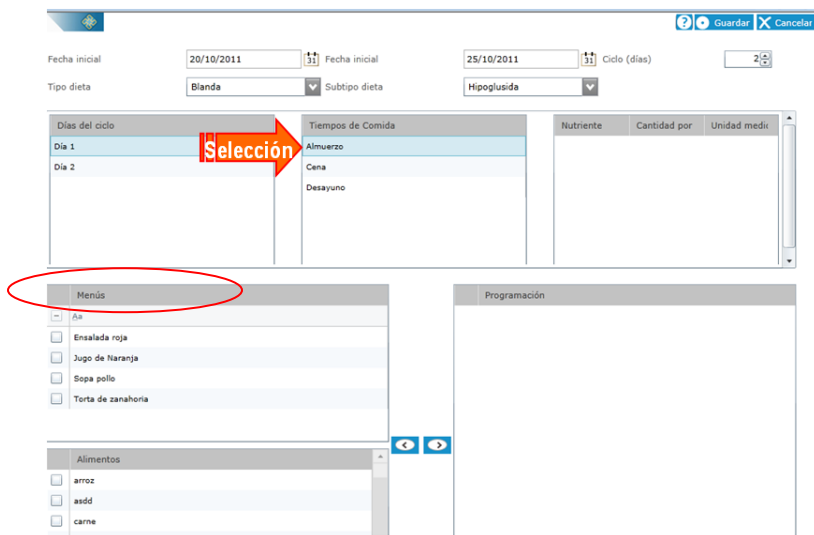

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Se seleccionan los menús y/ o alimentos para este tiempo de comida.

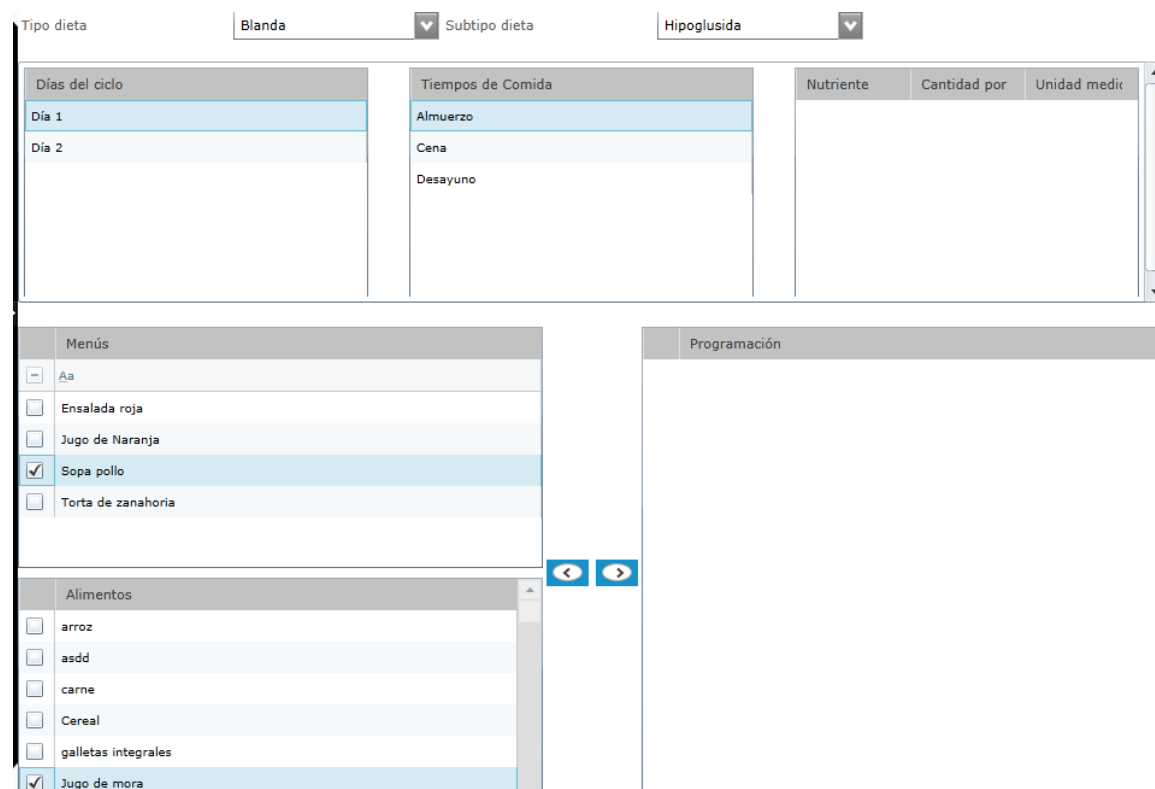

En la ventana de Menú en el check del plato se selecciona y luego en el botón de agregar  sucede lo mismo en la ventana de alimentos este se selecciona en el check de alimento y se le da agregar en el botón para que vaya incluyéndolos en la ventana de programación que se le incluye del tiempo de comida seleccionado y así se le va agregando la programación a cada tiempo de comida por el ciclo de día seleccionado.

Se selecciona el check del menú y/o alimento y luego con este botón  y lo retira de la ventana de la programación.

Cuando se agregan los menús y/o alimentos estos ingresan a la ventana de programación y de manera informativa muestra en la ventana los nutrientes la cantidad y unidad de medida.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Días del ciclo Día 1 Día 2	Tiempos de Comida Almuerzo Cena Desayuno	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nutriente</th> <th>Cantidad por</th> <th>Unidad medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grasas</td> <td>120</td> <td>g</td> </tr> <tr> <td>Proteína</td> <td>452</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>Calcio</td> <td>140</td> <td>Und</td> </tr> <tr> <td>Hierro</td> <td>730</td> <td>mg</td> </tr> </tbody> </table>	Nutriente	Cantidad por	Unidad medida	Grasas	120	g	Proteína	452	mg	Calcio	140	Und	Hierro	730	mg
Nutriente	Cantidad por	Unidad medida															
Grasas	120	g															
Proteína	452	mg															
Calcio	140	Und															
Hierro	730	mg															

Menús ☐ Aa ☐ Ensalada roja ☐ Jugo de Naranja ☐ Torta de zanahoria	Alimentos ☐ asdd ☐ carne ☐ Cereal ☐ galletas integrales ☐ leche ☐ Lentejas	Programación ☐ Sopa pollo ☐ Jugo de mora
--	---	---

Y de esta manera se le agrega para cada tiempo de comida que se ha seleccionado los menús y/o alimentos de acuerdo a la programación de la dieta creado y lo para el siguiente ciclo se hace lo el mismo procedimiento de seleccionar el tiempo de comida y para cada uno de este tiempo se le agrega un menú y/o alimento.

Al terminar de completar los ciclos se da clic en el botón .

Mensaje Panacea

Sus cambios han sido guardados exitosamente en la base de datos.

Aceptar

Cuando se da clic en la opción del botón de guardar si no tiene fechas que ya están incluidas en una programación ya creada anteriormente guarda bien pero si ya hay fechas las cuales ya están incluidas entonces genera este mensaje

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)


	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	



Si la información está completa, al pulsar guardar el sistema informa el guardado éxito, como se describe en la sección 1.2 generalidades PANACEA, confirmación de operaciones del presente documento.

El botón  ejecuta las acciones descritas en la sección 1.2 generalidades PANACEA, cancelar del presente documento.

- Consultar Programación de dietas: Al ingresar a la opción Programación de dietas se visualiza las opciones de tipo de dieta, subtipo de dieta y botón buscar. El grid inicial donde se encuentran permitiendo realizar filtros por Fecha inicial, Fecha final y Días ciclo (Ver sección 1.2 generalidades panacea, filtros en grid)

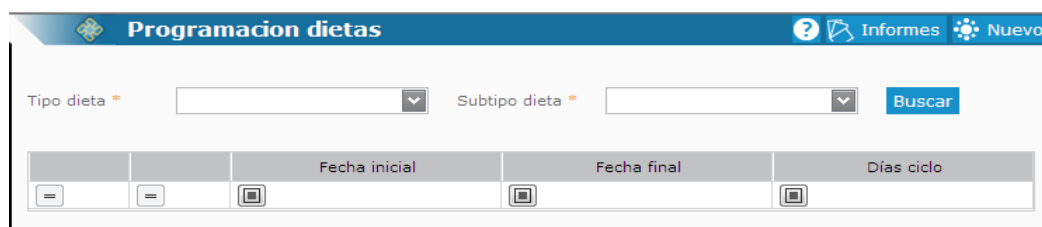


ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Luego se selecciona el tipo y subtipo de dieta y clic en buscar y este visualiza las programaciones que están creadas con ese tipo y subtipo. En el grid se encuentra la opción ver, clonar.



			Fecha inicial	Fecha final	Días ciclo
Ver	Clonar		13-10-2011	15-10-2011	2
Ver	Clonar		16-10-2011	20-10-2011	2
Ver	Clonar		21-10-2011	26-10-2011	2
Ver	Clonar		27-10-2011	30-10-2011	2
Ver	Clonar		01-11-2011	05-11-2011	2

En el link de ver visualiza la ventana que muestra de manera informativa la programación de dieta que se ha seleccionado indicando la fecha inicial, fecha final, ciclos(días), tipo y subtipo de dieta, la programación para cada día indicando que menú y/o alimento que tiene para cada tiempo y también el total de nutrientes especificando por días

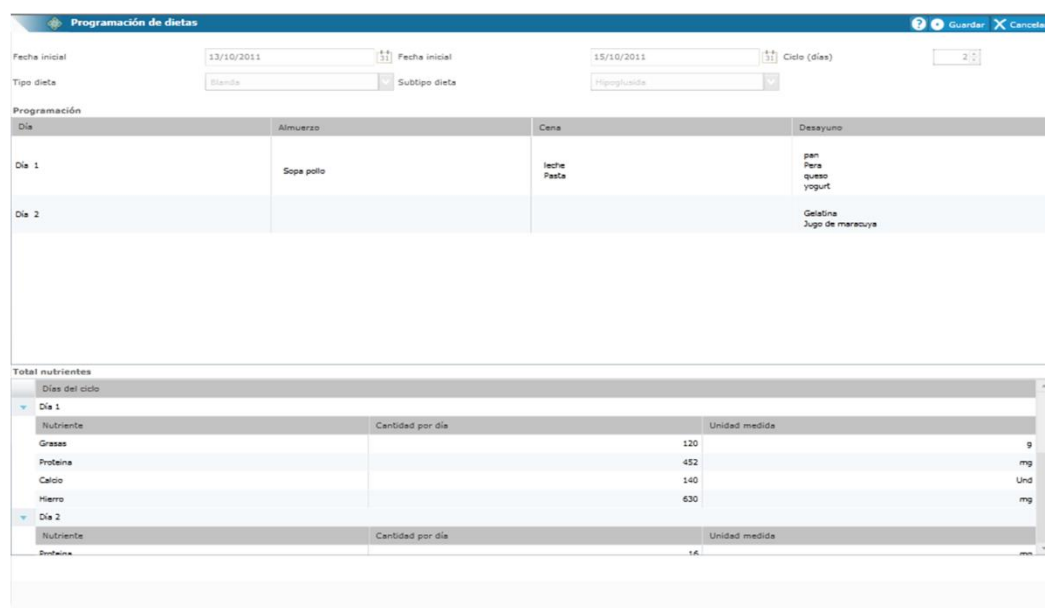

Día	Almuerzo	Cena	Desayuno
Día 1	Sopa pollo	Leche Pasta	pan Pera queso yogurt
Día 2			Gelatina Jugo de maracuya

Total nutrientes			
Día del ciclo	Nutriente	Cantidad por día	Unidad medida
Día 1	Grasas	120	g
	Proteína	452	mg
	Calcio	140	Und
	Hierro	630	mg
Día 2	Nutriente	Cantidad por día	Unidad medida
	Proteína	16	mg

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

- Clonar Programación de dietas: Para clonar la Programación de dietas haga clic en la opción clonar [Clonar](#), el sistema visualiza la ventana la cual permite modificar únicamente la fecha de la programación de la dieta y el resto de datos que da igual.




Programación dietas

Tipo dieta: Blanda Subtipo dieta: Hipoglusida **Buscar**

		Fecha inicial	Fecha final	Días ciclo
Ver	Clonar	13-10-2011	15-10-2011	2
Ver	Clonar	16-10-2011	20-10-2011	2
Ver	Clonar	21-10-2011	26-10-2011	2
Ver	Clonar	27-10-2011	30-10-2011	2
Ver	Clonar	01-11-2011	05-11-2011	2
Ver	Clonar	06-11-2011	11-11-2011	2

A dar clic en clonar el sistema visualiza la ventana donde permite modificar la fecha únicamente

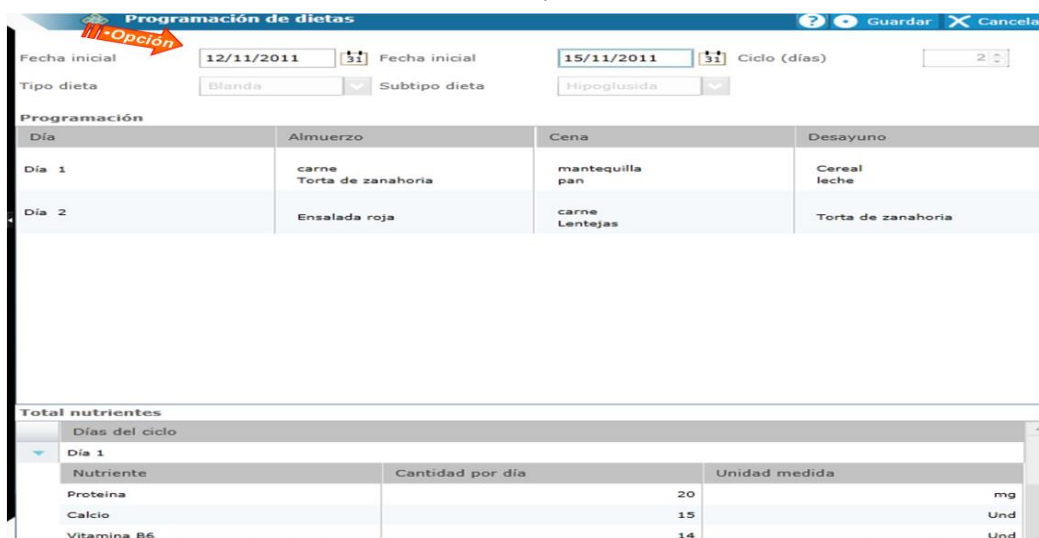

Programación de dietas

Fecha inicial: 12/11/2011 Fecha inicial: 15/11/2011 Ciclo (días): 2

Tipo dieta: Blanda Subtipo dieta: Hipoglusida

Programación

Día	Almuerzo	Cena	Desayuno
Día 1	carne Torta de zanahoria	mantequilla pan	Cereal leche
Día 2	Ensalada roja	carne Lentejas	Torta de zanahoria

Total nutrientes


Días del ciclo	Nutriente	Cantidad por día	Unidad medida
Día 1	Proteína	20	mg
	Calcio	15	Und
	Vitamina B6	14	Und

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	


Luego de haber modificado la fecha se le da clic en guardar y quedan los datos guardados con diferente tipo de fecha.

- Haga clic en el botón informes,  el sistema carga la siguiente ventana.

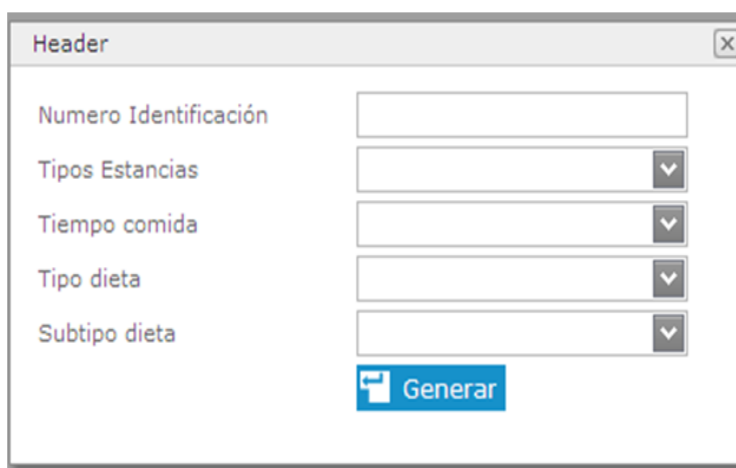

Después de seleccionar una opción, haga clic en generar.

Se le indica Fecha inicial y Fecha final, haga clic en Ver Reporte y el sistema traerá la programaciones relacionados con los rangos de fecha indicadas, como se muestra en la siguiente figura.

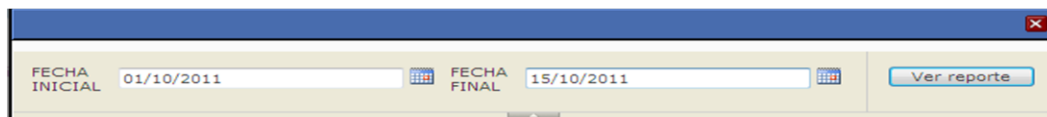

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

De esta manera genera el informe



ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27 VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	 Sistemas de Información S.A.
---	---	---	---

3.4 Consultar Ordenes dieta

Ruta: Menú Asistencial → Nutrición → Consultar Ordenes dieta



La Consulta de las órdenes de tipo dieta que han sido generadas de tipo interna es decir a los pacientes que actualmente tienen una admisión porque se encuentran hospitalizados.

Al ingresar a la opción de Consultar Ordenes de dieta se visualiza el botón de Informes y se encuentra las opciones de Tiempo comida con su correspondiente combo para seleccionar y se genera la opción en el botón buscar y el grid con las columnas Tipo dieta, Subtipo dieta, Paciente, Numero Identificación, Genero, Edad, Numero de orden, Tiempo comida Tipo estancia, Habitación, cama.

Seleccionamos el Tiempo comida y damos clic en buscar



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Después de seleccionada el Tiempo comida esta despliega la información de los pacientes que se le han generado ordenes de tipo dieta.

Consultar ordenes dieta								
Tiempo comida * Todos Buscar								
Tipo dieta	Sub tipo dieta	Paciente	Número identificación	Genero	Edad	Número orden	Tiempo comida	Tipo estancia
Blanda	Hipoglucida	Jeny Victoria Cardenas Perez	52425793	F	70	20110825	Desayuno	Hospitalización quemados
		Adriana María López Valdez	10125985	F	29	20110825		Hospitalización quemados
	Hiposódica	DANIEL FERNANDO SERRANO PARRA	877866	M	20	20110825		Hospitalización quemados
		JUANA SALGADO	125635	F	19	20110825	Desayuno	Hospitalización quemados

En la columna se puede visualizar el botón de ver programación **Ver Programació** se le da clic y esta visualiza la ventana la cual muestra la programación de dieta que tiene el paciente asignado.

Consultar ordenes dieta								
Tiempo comida * Todos Buscar								
Genero	Edad	Número orden	Tiempo comida	Tipo estancia	Habitación	Cama		
F	70	20110825	Desayuno	Hospitalización quemados	sala	CAMA	Selección Ver Programació	Ver alergias
F	29	20110825		Hospitalización quemados	sala	CAMA	Ver Programació	Ver alergias
M	20	20110825		Hospitalización quemados	sala	CAMA	Ver Programació	Ver alergias
F	19	20110825	Desayuno	Hospitalización quemados	sala	CAMA	Ver Programació	Ver alergias

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

A continuación muestra la ventana de ver la programación.

Programación de dietas [?] [Guardar] [Cancelar]

Fecha inicial: 16/10/2011 [↑↓] Fecha inicial: 20/10/2011 [↑↓] Ciclo (días): 2 [↑↓]

Tipo dieta: Blanda [v] Subtipo dieta: Hipoglucida [v]

Día	Almuerzo	Cena	Desayuno
Día 1	arroz carne Jugo de Naranja Sopa pollo	Jugo de mora Ensalada roja	Cereal leche Torta de zanahoria
Día 2		arroz Ensalada roja	Cereal Para queso yogurt Jugo de Naranja

Total nutrientes

Días del ciclo	Nutriente	Cantidad por día	Unidad medida
Día 1	Hierro	644	mg
	Vitamina B6	26	Und
	Calcio	159	Und

También hay una columna de ver alergias se le da clic en [Ver alergias](#) y esta mostrara las alergias que tiene asociado el paciente en cuanto el consumo de alguno de un alimento.

Consultar ordenes dieta [?] [Información]

Tiempo comida: [v] [Buscar](#)

Número orden	Tiempo comida	Tipo estancia	Habitación	Cama		
	[v]	[v]	[v]	[v]	[=]	[=]
0825	Desayuno	Hospitalización quemados	sala	CAMA	Ver Programación	Ver alergias
0825		Hospitalización quemados	sala	CAMA	Ver Programación	Ver alergias
0825		Hospitalización quemados	sala	CAMA	Ver Programación	Ver alergias
0825	Desayuno	Hospitalización quemados	sala	CAMA	Ver Programación	Ver alergias

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Para las alergias que puede tener un paciente asociado a un alimento o menú/plato se le indicara por medio del color naranja que este indicara que el paciente tiene alergia a un alimento o menú/plato.

Consultar ordenes dieta								
Tiempo comida				Buscar				
Sub tipo dieta	Paciente	Número identificación	Genero	Edad	Número orden	Tiempo comida	Tipo estancia	Habitación
Hipoglucida	Jeny Victoria Cardenas Perez	52425793	F	70	20110825	Desayuno	Hospitalización quemados	sala
	Adriana Maria López Valdez	10125985	F	29	20110825		Hospitalización quemados	sala
Hiposódica	DANIEL FERNANDO SERRANO PARRA	877866	M	20	20110825		Hospitalización quemados	sala
	JUANA SALGADO	125635	F	19	20110825	Desayuno	Hospitalización quemados	sala

Al dar clic en la el botón de alergias esta visualiza la información de la alergia que tiene al Menú o Alimento.

Header


Menús

Nombre
Sopa pollo

Alimentos

Nombre

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

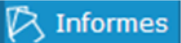- Haga clic en el botón informes,  el sistema carga la siguiente ventana.

Header

Numero Identificación

Tipos Estancias

Tiempo comida

Tipo dieta

Subtipo dieta

Generar

Después de seleccionar una opción, haga clic en generar.

1 de 1
75%
Buscar | Buscar siguiente

Ordenes de Dietas
SALUD PANACEA EPS / Número de identificación tributaria 124
somos más
CALLE 146yy 123 Bogotá D.C / Colombia

TIEMPO COMIDA	TIPO DIETA	SUBTIPO DIETA	TIPO ESTANCIA	HABITACIÓN	CAMA	TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE PACIENTE	GÉNERO	EDAD	OBSERVACIONES	ALERGIAS
Desayuno	Blanda	Hipoglucida	No hospitalización quemados	1010	CAU4	C C	52425738	Jeny Victoria Cordero Perez	F	70	sin observaciones	

10/18/2011 4:15 PM
DESARROLLO9.intranet.cnt.com.co

Panacea1


1 de 1
SEDE CARBONARA

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

3.5 Ordenes de producción para nutrición parenteral

Ruta: Menú Asistencial → Nutrición → Orden Parenteral

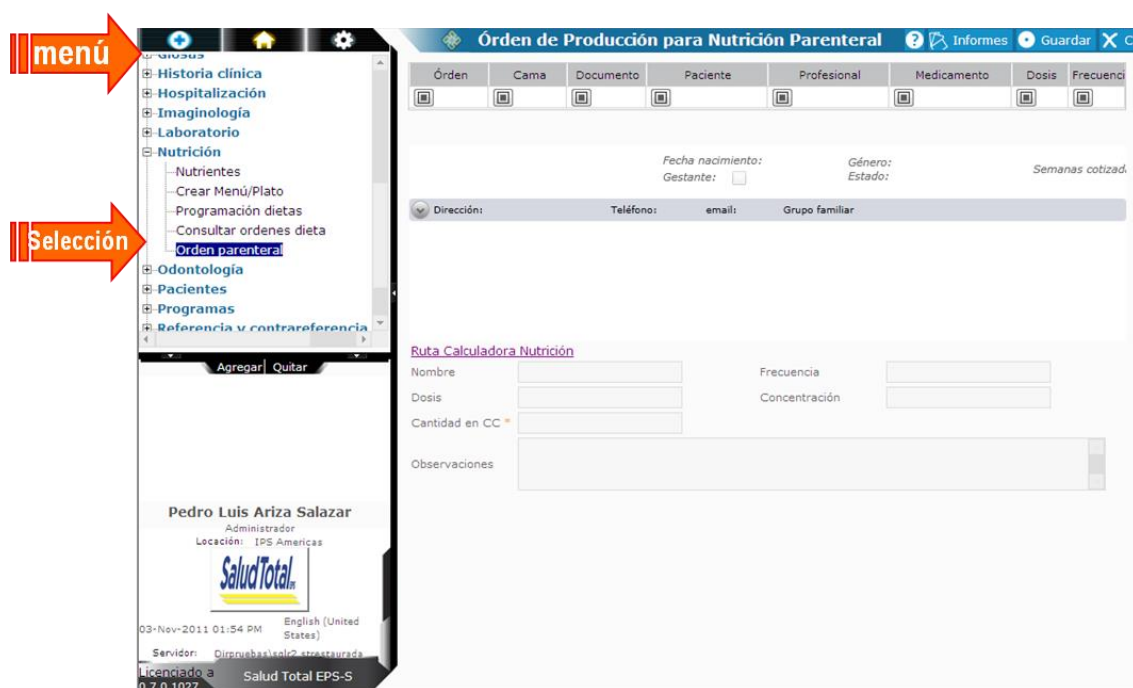

Permite la generación de la orden de producción para la central de mezclas de nutrición parenteral, tomando como base las ordenes de medicamentos con marca de mezcla.


Al ingresar a la opción Ordenes de producción para nutrición parenteral se visualiza el botón de Informes, guardar y cancelar y el grid con las columnas Orden, cama, documento del paciente, Paciente, Profesional, Medicamento, dosis y frecuencia.

Tiene como opción de poder utilizar la ruta de la calculadora de Nutrición esta debe parametrizarse en Menu/Configuracion/Parametrizacion/Parametros Generales/Nutricion/Ruta Calculadora Nutrición/
<http://www.calculadora.org/cientifica/>

Luego de seleccionar la orden esta carga los datos del paciente, al cargar los datos también carga le nombre del medicamento, frecuencia, dosis, concentración, teniendo en cuenta que se puede ingresar el valor puede digitar cantidad en CC y si se desea las observaciones al respecto.


	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

Al seleccionar la orden esta carga los datos del paciente en la cual esta generado la orden para producción para nutrición

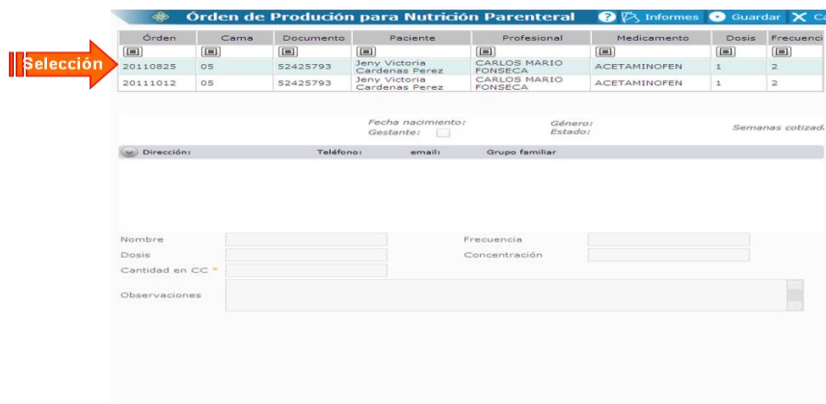

Orden	Cama	Documento	Paciente	Profesional	Medicamento	Dosis	Frecuencia
20110825	05	52425793	Jeny Victoria Cardenas Perez	CARLOS MARIO FONSECA	ACETAMINOFEN	1	2
20111012	05	52425793	Jeny Victoria Cardenas Perez	CARLOS MARIO FONSECA	ACETAMINOFEN	1	2

En la parte inferior se observa se cargan los datos del medicamento que se le va a suministrar

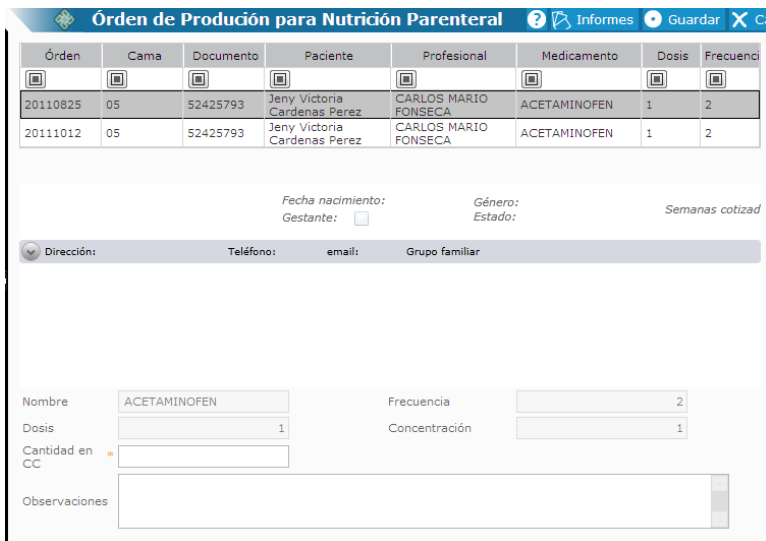


Orden	Cama	Documento	Paciente	Profesional	Medicamento	Dosis	Frecuencia
20110825	05	52425793	Jeny Victoria Cardenas Perez	CARLOS MARIO FONSECA	ACETAMINOFEN	1	2
20111012	05	52425793	Jeny Victoria Cardenas Perez	CARLOS MARIO FONSECA	ACETAMINOFEN	1	2


ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	Carolina Romero			(Nombre de quien aprueba)	
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior			(Cargo de quien aprueba)	
Fecha:	18 de Octubre de 2011			(Diciembre de 2009)	

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

Luego ingresamos la cantidad en CC y se desea observaciones en cuanto al medicamento

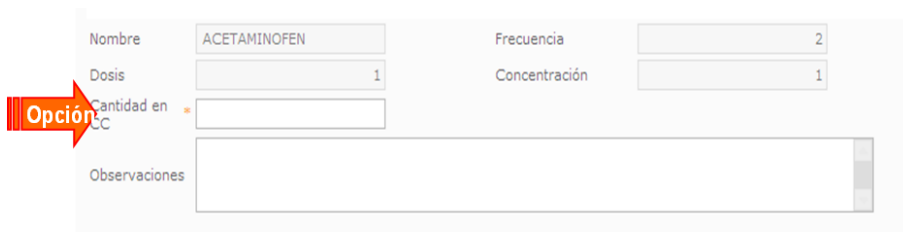

Después de ingresada la cantidad se da clic en guardar

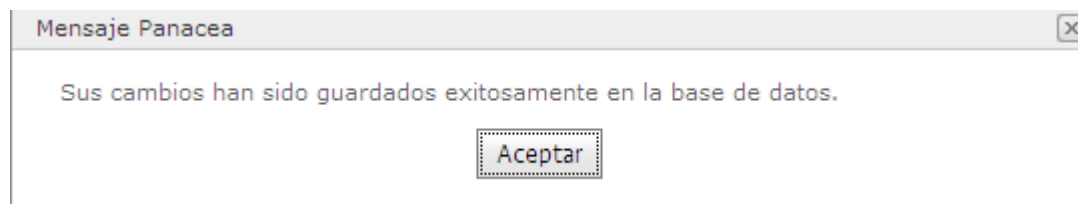
Si la información está completa, al pulsar guardar el sistema informa el guardado éxito, como se describe en la sección 1.2 generalidades PANACEA, confirmación de operaciones del presente documento.

El botón  ejecuta las acciones descritas en la sección 1.2 generalidades PANACEA, cancelar del presente documento.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

- Haga clic en el botón informes,  el sistema carga la siguiente ventana.

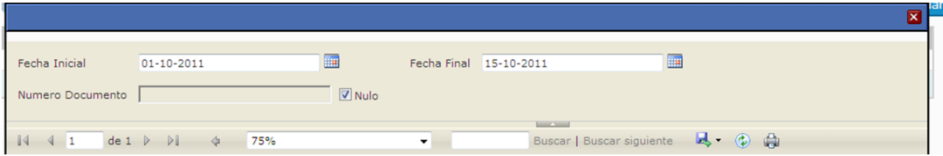


Fecha Inicial: 01-10-2011 Fecha Final: 15-10-2011

Numero Documento: ☒ Nulo

1 de 1 75% Buscar | Buscar siguiente

Se le ingresa la fecha inicial y fecha final o también por en número de documento

Haga clic en Ver Reporte y el sistema traerá la orden parenterales relacionados con los rangos de fecha indicadas, o al documento del paciente y es el caso como se muestra en la siguiente figura.

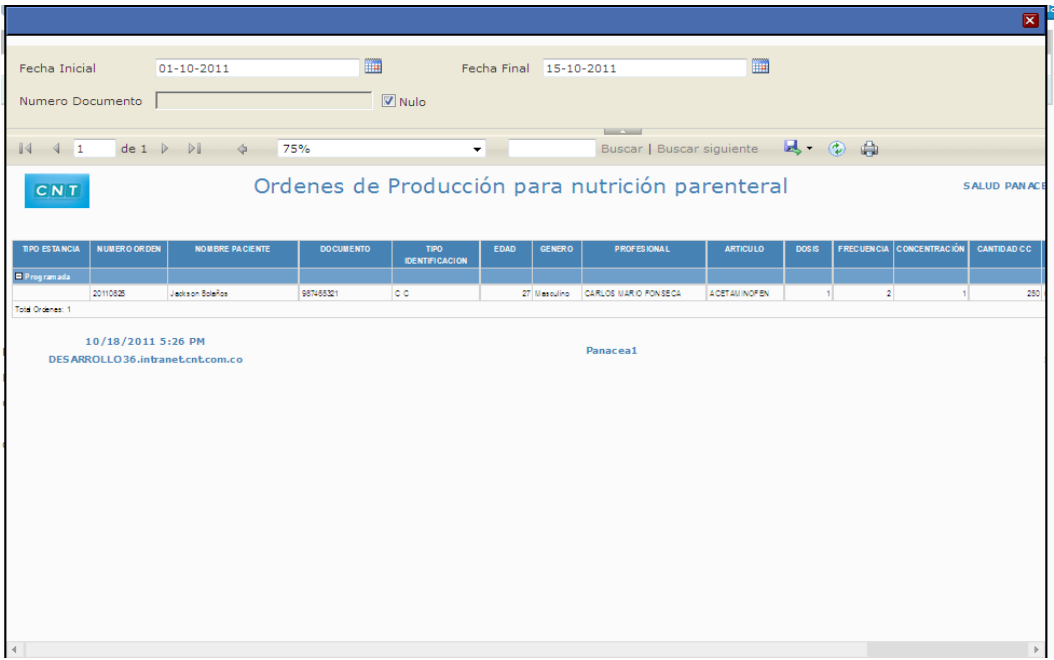

Ordenes de Producción para nutrición parenteral

TIPO ESTANCIA	NUMERO ORDEN	NOMBRE PACIENTE	DOCUMENTO	TIPO IDENTIFICACION	EDAD	GENERO	PROFESIONAL	ARTICULO	DOSIS	FRECUENCIA	CONCENTRACION	CANTIDAD CC
Programada	20110828	Jesison Soto	987455321	C.C.	27	Masculino	CARLOS GUARDO PONCECA	ACETAMINOFEN	1	2	1	250


Total Ordenes: 1

10/18/2011 5:26 PM
DESARROLLO36.intranet.cnt.com.co


Panacea1

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	Carolina Romero				(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior				(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011				(Diciembre de 2009)

ERRORES FRECUENTES

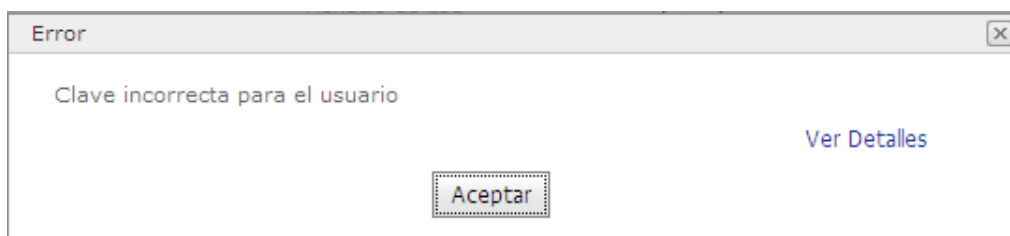

Observaciones y Manejo: Verificar que la clave de ingreso al sistema sea correcta.

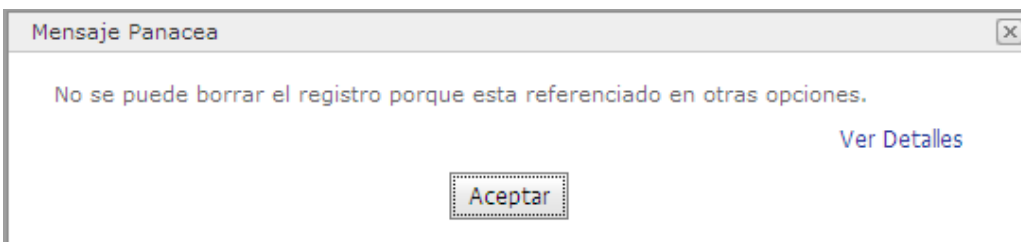

Observaciones y Manejo: Dentro de la opción detalle es posible conocer las tablas donde el registro está relacionado; se sugiere inactivar el registro; si se desea eliminar, entonces deben primero eliminarse las relaciones existentes.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

PREGUNTAS FRECUENTES

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

GLOSARIO

C

Check: Es una opción que tiene el sistema para marcar o seleccionar un registro.

Combo box simple: Es un combo de selección única, que no está embebido dentro de un grid o que no muestra las opciones posibles como un grid.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE NUTRICIÓN	CÓDIGO: 27	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: X-OCTUBRE-2011	

NOTAS DE CAMBIOS

Versión documento	Versión Programa	Fecha	Observaciones	Usuario que modifica
1.0		18 de octubre de 2011	Versión original del documento	Carolina Romero
1.1		3 de noviembre de 2011	Se le adiciona a orden parenteral en la aplicación la ruta de la calculadora.	Carolina Romero

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	18 de Octubre de 2011		(Diciembre de 2009)